




CT LUCIA

Instructions de manipulation




Seeing beyond

Préparation de CT LUCIA 621P / 621PY et de CT LUCIA 221P

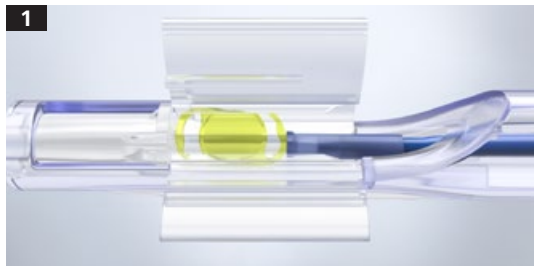


1 Vérifier que la lentille soit centrée et stable dans la chambre de la LIO.

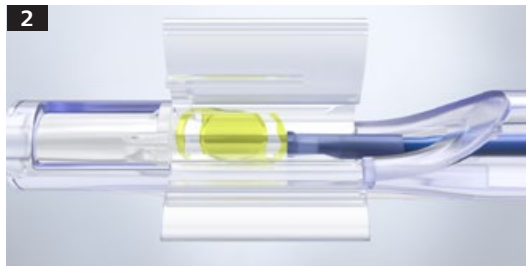


2 Recouvrir toute la lentille et l'extrémité bleue du piston avec une **généreuse** quantité d'OVD. Éviter de toucher la lentille et l'extrémité bleue du piston.



3 Fermer l'opercule de la chambre de la LIO. **IMPORTANT** : laisser la lentille dans cette position jusqu'à ce que le chirurgien soit prêt à l'insérer dans l'œil.

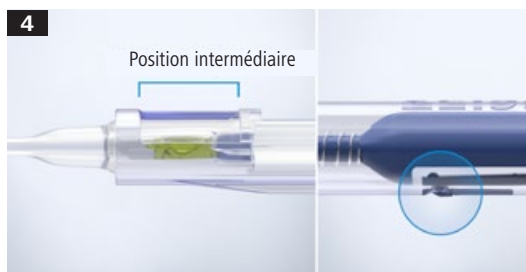

4 Avancer la lentille en position intermédiaire. Appuyer doucement sur le piston vers l'avant jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. **IMPORTANT** : la lentille doit être implantée immédiatement.

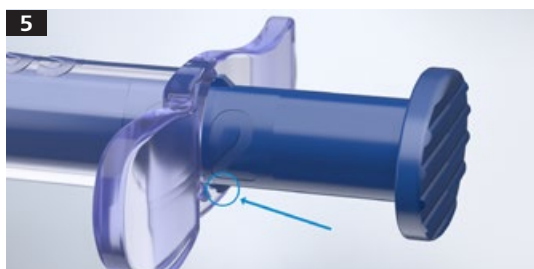

5 Faire avancer lentement la lentille jusqu'à ce qu'elle soit sortie de l'injecteur.

Si elle ne sort pas complètement, exercer une pression supplémentaire au niveau de la bride de pouce pour libérer la lentille.

6 Positionner la lentille avec précaution dans le sac capsulaire.

7 Éliminer le dispositif. Ne pas réutiliser le système d'insertion.

CE 0297

CT LUCIA 221P
CT LUCIA 621P / 621PY



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/lucia
www.zeiss.com/med/contacts