

AT ELANA 841P

Instruções de manuseamento




Seeing beyond

Passos preparatórios



1 Verificar se a lente está centrada e fixa na câmara da LIO.

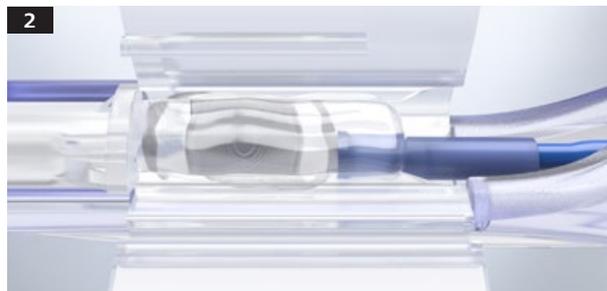


2 Cobrir toda a lente e a ponta azul do êmbolo com uma quantidade **generosa** de OVD. Evitar tocar na lente e na ponta azul do êmbolo.



3 Fechar a tampa da câmara da LIO.

IMPORTANTE: Manter a lente na posição até o cirurgião estar pronto para a implantar no olho.

Passos da implantação

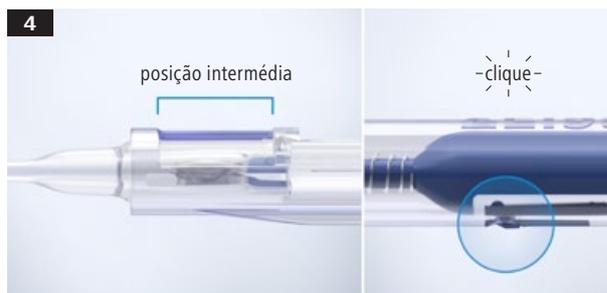

4 Avançar a lente para a posição intermédia. Pressionar cuidadosamente o êmbolo para a frente até ouvir um «clique».


IMPORTANTE: A lente deve ser implantada imediatamente.



5a Injeção: Certificar-se de que as asas da câmara de carregamento estão viradas para cima.



5b Avançar lentamente a lente até esta ser libertada do injetor. Se a inserção for incompleta, aplicar força adicional no flange para polegar para libertar a lente. **Funcionalidade de assistência:** A paragem incremental na parte posterior do injetor ajuda a controlar o excesso de avanço do êmbolo no final da inserção da LIO.

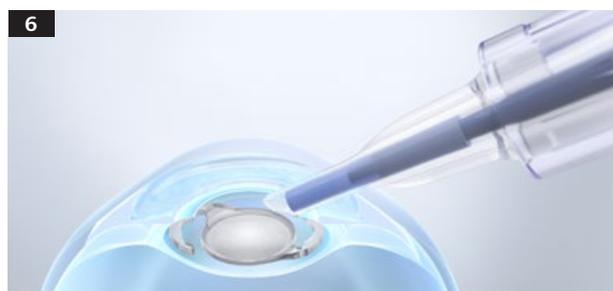

6 Posicionar cuidadosamente a lente no saco capsular.

7 Eliminar o dispositivo. Não reutilizar o injetor.

CE 0297

AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Alemanha

www.zeiss.com/elana

www.zeiss.com/med/contacts

pt-0US_32_012_00511 CZ-III/2024 Edição internacional: disponível apenas em países selecionados.
O conteúdo desta brochura pode diferir do estado atual de aprovação do produto ou serviço em oferta no seu país. Para obter mais informações, entre em contacto com os nossos representantes regionais. Sujeito a alterações ao nível do design e do âmbito de entrega e como resultado do contínuo aperfeiçoamento técnico. AT ELANA 841P é uma marca comercial ou uma marca registada da Carl Zeiss Meditec AG ou de outras empresas do Grupo ZEISS na Alemanha e/ou noutros países.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Todos os direitos reservados.