




CT LUCIA

Istruzioni d'uso



Seeing beyond

Preparazione di CT LUCIA 621P/621PY e CT LUCIA 221P

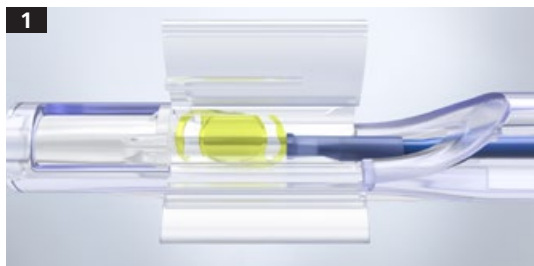

1 Verificare che la lente intraoculare sia centrale e ben posizionata nel caricatore.




2 Coprire l'intera lente e l'estremità blu dello stantuffo con una **generosa** quantità di OVD. Evitare il contatto con la lente e l'estremità blu dello stantuffo.




3 Chiudere il coperchio del caricatore.

IMPORTANTE: lasciare la lente in questa posizione finché il chirurgo è pronto per l'impianto.

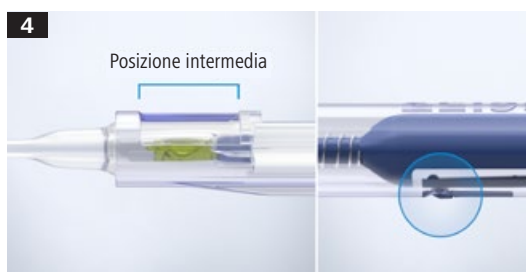

4 Portare la lente in posizione intermedia. Premere delicatamente lo stantuffo in avanti fino ad udire un "clic".

IMPORTANTE: la lente deve essere impiantata immediatamente.

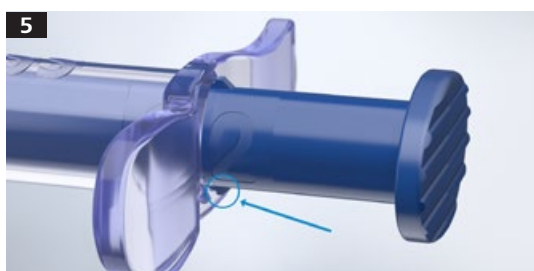

5 Fare avanzare lentamente la lente finché viene rilasciata dall'iniettore. Se l'impianto è incompleto, esercitare una maggiore pressione sulla flangia per rilasciare la lente.

6 Posizionare accuratamente la lente nel sacco capsulare.

7 Gettare il dispositivo. Non riutilizzare il sistema di iniezione.

CE 0297

CT LUCIA 221P
CT LUCIA 621P / 621PY



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Germania
www.zeiss.com/lucia
www.zeiss.com/med/contacts