


AT ELANA 841P

Gebrauchsanweisung




Seeing beyond

Vorbereiten

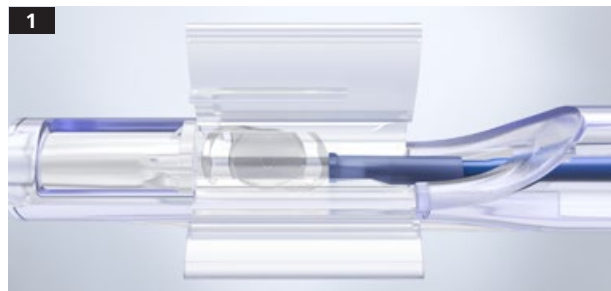

Überprüfen Sie, dass die Linse sicher und mittig in der Ladekammer positioniert ist.

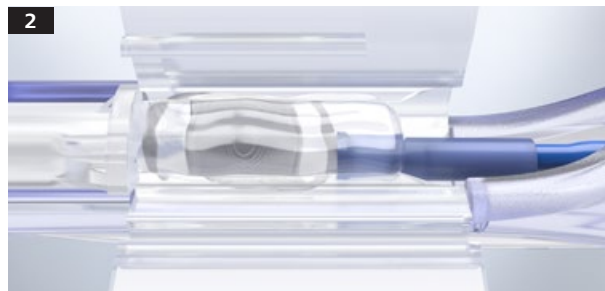


Viskoelastikum **großzügig** auf die gesamte Linse und die blaue Kolbenspitze auftragen. Dabei die Linse und die blaue Kolbenspitze nicht berühren.

Implantation




Die Flügel der Ladekammer schließen.

WICHTIG: Die Linse in dieser Position belassen, bis der Chirurg sie in das Auge einbringt.

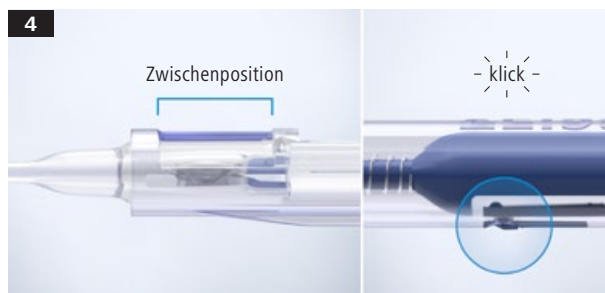

Die Linse in die Zwischenposition vorschieben. Den Kolben sanft eindrücken, bis ein leichtes Klicken hörbar ist.

WICHTIG: Die IOL muss sofort implantiert werden.

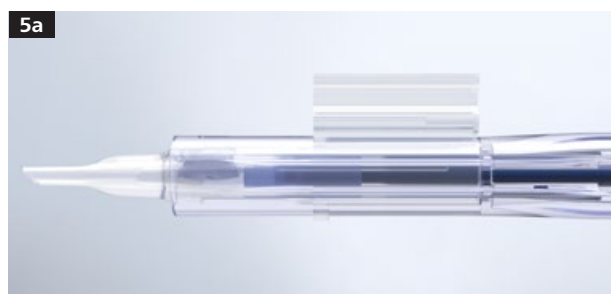


Injektion: Stellen Sie sicher, dass die Flügel der Ladekammer nach oben zeigen.



Die Linse langsam vorschieben, bis sie aus dem Injektor ausgetreten ist. Bei unvollständigem Austritt zusätzlichen Druck auf den Druckansatz ausüben, bis die Linse freigegeben wird.

Assistenzfunktion: Der Anschlag am hinteren Ende des Injektors verhindert, dass der Kolben bei Abschluss der IOL-Implantation zu weit eingedrückt wird.

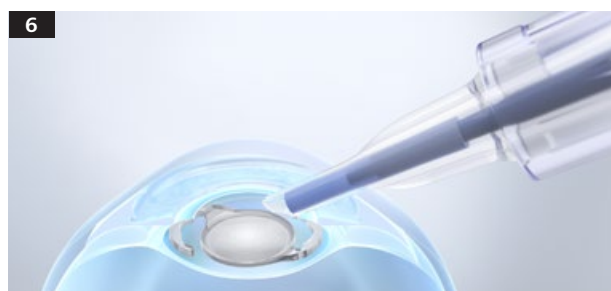

Die Linse vorsichtig im Kapselsack positionieren.

7
Die Vorrichtung entsorgen. Das Abgabesystem darf nicht wiederverwendet werden.



0297

AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Deutschland

www.zeiss.com/elana

www.zeiss.de/med/kontakte

de-INT_32_012_00511 Gedruckt in Deutschland. CZ-I/2022 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.
AT ELANA 841P ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten.