

### **OPMI Lumera T de ZEISS**

Excellence en matière d'éclairage





### **ZEISS OPMI Lumera T**

Mettre la lumière sur les détails pour une meilleure prise de décision

La gamme OPMI LUMERA® de ZEISS incarne l'excellence en termes d'optique et d'éclairage. Grâce à sa technologie de visualisation ZEISS de grande qualité et son éclairage coaxial et stéréoscopique (SCI), ZEISS OPMI Lumera T modifiera votre perception des détails au cours de l'opération de la cataracte et de la rétine.

- Percevez les structures les plus infimes lors de l'opération
- Identifiez les détails de la rétine
- Percevez les superpositions de l'image en temps réel dans l'oculaire grâce au système d'injection des données externes (EDIS)
- Réglez la profondeur de champ par simple pression d'un bouton
- Visionnez les structures de l'œil en couleurs naturelles



### Le système de caméra 1Chip HD

avec écran intégré pour le visionnement de vidéos permet une excellente visualisation des rendus de couleurs naturelles et des détails anatomiques nets.

### L'optique ZEISS inégalée

pour une clarté, un contraste et une lumière d'exception

#### **RESIGHT®** de ZEISS

offre une vue claire et détaillée de la rétine.

Instant Red Reflex pour un éclairage brillant de l'œil – grâce à l'éclairage coaxial et stéréoscopique (SCI), même en cas de cataractes mûres.

Éclairage au xénon Superlux® eye intégré pour une visualisation de la structure oculaire en couleurs naturelles et hautement détaillée.

### Microscope d'assistant intégré.

Le choix de la mise au point et du grossissement se fait indépendamment du visionnement du chirurgien pour une assistance active.

#### **Positionnement sans effort avec**

frein magnétique. Le système glisse facilement dans une nouvelle position. Lorsqu'il est verrouillé, le microscope opératoire reste fermement en place.

### Le système de réglage

de la profondeur de champ Deep View vous permet de choisir entre une profondeur de champ maximale ou une transmission lumineuse optimale.

# Chirurgie de la cataracte

En matière d'opération de la cataracte, le SCI et CALLISTO eye® de ZEISS offrent une excellente visualisation antérieure ainsi que des fonctions d'assistance de grande précision 1,2,3 pour accélérer les flux de travail opératifs et améliorer la précision des interventions chirurgicales.

#### Lueur pupillaire optimisée

Avec l'éclairage coaxial et stéréoscopique (SCI) désormais totalement établi et l'optique ZEISS réputée, ZEISS OPMI Lumera T permet un affichage clair des structures anatomiques les plus infimes. Sa lueur pupillaire (red reflex) très contrastée et stable améliore encore la perceptibilité des détails.

# Affichage des fonctions d'assistance dans l'oculaire

Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le système de gestion des opérations CALLISTO eye, ZEISS OPMI Lumera T offre une série de fonctions d'assistance pour procéder avec précision aux incisions LRI, au capsulorhexis, au centrage IOL et à l'alignement IOL torique<sup>1,2,3</sup>. Toutes les fonctions d'assistance sont directement injectées dans l'oculaire via EDIS (Système d'injection externes) sous la forme d'images à haute résolution et au contraste élevé, et sont manœuvrables

avec le pédalier de commande sans fil. Elles permettent au chirurgien de travailler d'une manière détendue et pleinement concentrée sans devoir lever les yeux des oculaires.

Les images en HD d'une haute qualité et les vidéos peuvent être également visualisées sur l'écran tactile du système ZEISS CALLISTO eye et être enregistrées à des fins de documentation.

### Fonctions d'assistance projetées dans l'oculaire



**Assistant d'incision/d'ILR**Superpose la position exacte et la taille de l'incision pour garantir la

précision<sup>1,2,3</sup> de l'opération.



Assistant de rhéxis Superpose la forme et la taille exacte du capsulorhexis et centre l'IOL le long de l'axe optique de l'œil du patient.



Z ALIGN® – assistant torique Injecte l'axe de référence et l'axe de pose visualisé dans l'oculaire de votre microscope pour garantir l'alignement précis¹.2.3 des LIO toriques sans marquage cornéen.




Visualisation de la courbure cornéenne en combinaison avec un kératoscope, p. ex. dans le cas de transplantations cornéennes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Données cliniques du Prof. Findl/Dr Hirnschall présentées au congrès de l'ESCRS en 2013 – Précision de l'alignement pré-/peropératoire techniquement vérifiée ± 1,0° en moyenne

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lackerbauer, C. Modern Solutions for Refractive Cataract Surgery: CALLISTO eye (solutions modernes, dédiées à la chirurgie réfractive de la cataracte : CALLISTO eye). Cataract & Refractive Surgery Today. Février 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Findl, O. Complications of the CCC. Cataract & Refractive Surgery Today Europe. Mars 2012

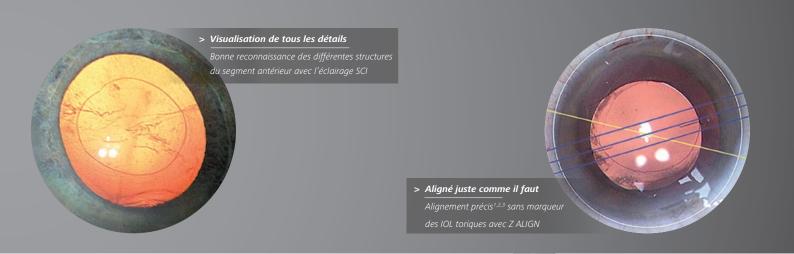

# Suppression des étapes inutiles dans le flux des tâches

Le microscope opératoire ZEISS OPMI
Lumera T fait partie intégrante de
la plateforme ZEISS Cataract Suite
markerless, étant des produits conçus
pour fonctionner en synergie et aligner les
LIO toriques avec autant de précision<sup>1,2,3</sup>
que de rapidité. Vous pouvez omettre
les étapes de marquage manuelles
pré/intraopératoires et le transfert
manuel des données pour un plus haut
niveau de confort, pour vous-même et
vos patients.



CALLISTO eye de ZEISS Opération LIO précise 1,2,3 et optimale tout en facilité



# Chirurgie de la rétine

Les systèmes de visualisation du fond d'œil ZEISS OPMI Lumera T et ZEISS RESIGHT vous permettent de reconnaître nettement les détails de la rétine.



### La gamme ZEISS RESIGHT offre une qualité optique d'excellence<sup>4</sup>

Les systèmes de visualisation du fond d'œil sans contact offrent une vue claire et détaillée de la rétine. ZEISS RESIGHT 500 et RESIGHT 700 intègrent l'optique du varioscope de ZEISS pour vous permettre de vous concentrer sur la rétine sans devoir déplacer le microscope. La tourelle innovatrice équipée de deux lentilles asphériques 128D et 60D vous permet

de passer rapidement à une seconde lentille et au grossissement. Si un contact accidentel a lieu avec l'œil du patient, le système se plie automatiquement. Comme seules les parties stériles doivent être changées, les optiques peuvent rester sur le microscope opératoire lors de sa préparation pour le prochain patient. C'est aussi simple que cela.



> Loupe maculaire de 60 D
Pour obtenir un grossissement
élevé de la macula

# Pleine efficacité du flux des tâches chirurgicales

#### Flux de tâches automatisé

Lorsque ZEISS RESIGHT 700 est utilisé, le microscope opératoire ajuste automatiquement les réglages du tube à inverseur Invertertube™.



#### Mettez le monde à l'envers

Le tube à inverseur Invertertube E combine l'optique ZEISS et les inverseurs optiques pour un design ergonomique unique qui encourage une position de travail confortable et droite sans tendre la colonne vertébrale.



#### Pédalier de commande autonome

Le pédalier de commande offre un positionnement souple et permet de configurer des fonctions sur la base de préférences.


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Optiques de seconde génération, de qualité optique bien supérieure et netteté, profondeur et reconnaissance du détail améliorées pour une utilisation avec la lentille 60D – sondage clinique interne de 2013 auprès de la clientèle, avec des chirurgiens leader d'opinion au niveau international

### Caractéristiques techniques

### S88/ZEISS OPMI Lumera T

### Données techniques

Microscope opératoire	Optique apochromatique
	Système de zoom motorisé ; facteur de zoom 1:6,
	rapport de grossissement s=0.4 à 2.4
	Plage de mise au point : 50 mm
	Tube binoculaire : Tube à inverseur Invertertube® (tube inclinable 0–180° en option)
	Oculaires : 10x (12.5x en option)
	Optique de l'objectif f=200 mm (f=175 mm en option)
	DeepView : système de réglage de la profondeur de champ
	Microscope d'assistant intégré.
	Entièrement stéréoscopique
Éclairage	SCI : éclairage du reflet rétinien et de la périphérie, tous deux avec variateur, brevet déposé
	Appareil de protection de la rétine
	Éclairage de la fibre optique
Source d'éclairage	Éclairage Superlux Eye au xénon muni d'une lampe commutable manuellement
	Filtre HaMode
	En option : Éclairage halogène 12V, 100W muni d'une lampe commutable automatiquement en cas de panne de la lampe
	Option : éclairage halogène double
	En option : xénon/éclairage halogène combiné
	Filtre d'arrêt UV 408 nm intégré
	Filtre de lumière bleue
	En option : filtre fluorescent
Couple X-Y	Plage 40 mm x 40 mm
	Bouton pour les positions de départ du couple X-Y et mise au point
Poids	13.7 kg (30.2 lb) (avec tube à inverseur, microscope d'assistant intégré, optique de l'objectif et oculaires)
Système de suspension	Statif de sol S88
	Charge maximale : 20 kg (44.1 lb) (microscope entier, accessoires inclus)

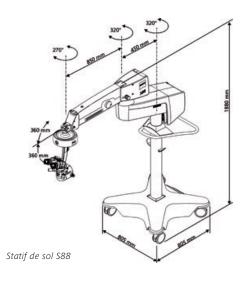

**(**E

**C**€ <sub>0297</sub>

CALLISTO eye IOLMaster 500 IOLMaster 700

Carl Zeiss Meditec AG

OPMI Lumera T

RESIGHT 500

RESIGHT 700

EDIS

Goeschwitzer Strasse 51-52 07745 léna Allemagne www.zeiss.com/med/contacts www.zeiss.com/meditec

L

Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou l'offre de service dans votre pays. Pour obtenir de plus amples informations, prendre contact avec votre représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. OPMI LUMERA, RESIGHT, CALLISTO eye, Superlux, Invertertube, Z ALIGN et K TRACK sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG. Imprimé sur du papier élémentaire, blanchi sans chlore.

FR\_32\_010\_010211