

Tratta con precisione.



Sistemi ingrandenti ad uso medicale
ZEISS EyeMag



zeiss.com/loupes

Seeing beyond



Sistemi ingrandenti ad uso medico ZEISS EyeMag



Ottiche di nuova generazione

La visione dettagliata di piccole strutture anatomiche è essenziale per il successo del trattamento. Immagini chiare e nitide sono ciò che gli utilizzatori si aspettano. Le ottiche ZEISS di alta qualità consentono una visione precisa fino ai minimi dettagli. Offrono prestazioni ottiche eccellenti e un'ampia gamma di ingrandimenti per soddisfare ogni esigenza.



Scelta personalizzata

Proprio come un paio di occhiali, i sistemi ingrandenti non sono solo uno strumento, ma anche un'espressione del tuo stile. Scegli tra una varietà di montature leggere in diversi colori e completa il sistema ingrandente con la potente illuminazione di ZEISS EyeMag Light II.



Gestione semplice e intuitiva

I sistemi ingrandenti ad uso medico di ZEISS offrono flessibilità in base alla tua situazione. È sufficiente indossare il sistema personalizzato e il gioco è fatto. Quando si utilizza il sistema ingrandente flip-up, le ottiche possono essere riposizionate con un'unica regolazione o possono essere completamente sollevate per avere un contatto visivo con il paziente quando l'ingrandimento non è necessario.

Sistemi ingrandenti ad uso medico ZEISS EyeMag

Su misura per ogni tua esigenza

I sistemi ingrandenti EyeMag® di ZEISS garantiscono eccellenti prestazioni ottiche a prescindere dal livello di esperienza. Gli strumenti per la visualizzazione offrono immagini molto nitide ed elevata profondità di campo nell'intera area d'intervento e possono essere dotati di

illuminazione LED. Facili da utilizzare e confortevoli da indossare, i sistemi ingrandenti EyeMag coniugano eleganza e design funzionale con un'ampia gamma di distanze di lavoro e diversi livelli di ingrandimento.



ZEISS EyeMag Smart TTL

- Nella soluzione through-the-lens, il sistema ottico è montato sulle lenti di supporto
- Con ingrandimento 2,5x o 3,0x
- Disponibile con montatura in titanio in varie forme e colori
- Sistema con valori di prescrizione individuali
- Ideale per utenti con esigenze di ingrandimento essenziali e che necessitano di un ampio campo visivo



ZEISS EyeMag Classic

- Sistema ingrandente personalizzato, il sistema ingrandente è montato sulla superficie delle lenti di supporto
- Con ingrandimento 2,0x o 2,5x
- Disponibile con montatura in titanio in varie forme e colori
- Sistema con valori di prescrizione individuali
- Modello base dal prezzo vantaggioso, ideale per gli utenti con esigenze di ingrandimento essenziali o per gli studenti



ZEISS EyeMag Light II

- In combinazione con le ottiche ZEISS di alta qualità, il sistema ZEISS EyeMag Light II garantisce dettagli nitidi e una visualizzazione accurata delle strutture di minore dimensione
- Si adatta perfettamente a tutti i sistemi ingrandenti EyeMag



ZEISS EyeMag Smart

- Flip-up
- Ingrandimento 2,5x
- Disponibile con montatura in titanio in varie forme e colori oppure sportiva
- Possibilità di inserire i valori di prescrizione medica individuali direttamente da ZEISS
- Ideale per gli utenti con esigenze di ingrandimento essenziali e la necessità di cambiare l'angolazione in modo flessibile durante l'uso




ZEISS EyeMag Pro F e ZEISS EyeMag Pro S

- Flip-up
- Con ingrandimento da 3,2x a 6,0x
- Disponibile con montatura in titanio in varie forme e colori oppure con pratica fascia
- Possibilità di inserire i valori di prescrizione medica individuali direttamente da ZEISS
- Ideale per gli utenti con esigenze elevate di ingrandimento e che necessitano di un cambio di angolazione flessibile durante l'uso

ZEISS EyeMag Classic

Disponibile con ingrandimento 2,0x o 2,5x e ottica galileiana, ZEISS EyeMag Classic è il modello più leggero di tutti i sistemi ingrandenti ad uso medicale di ZEISS. Montati sulla superficie delle lenti di supporto, i sistemi ottici personalizzati forniscono una visualizzazione chiara dei dettagli e delle strutture più minute e sono

personalizzati con precisione in base alla tua prescrizione medica. ZEISS EyeMag Classic è un sistema ideale per gli studenti di medicina e per i professionisti che non hanno esperienza con le lenti, o che preferiscono un modello particolarmente leggero.

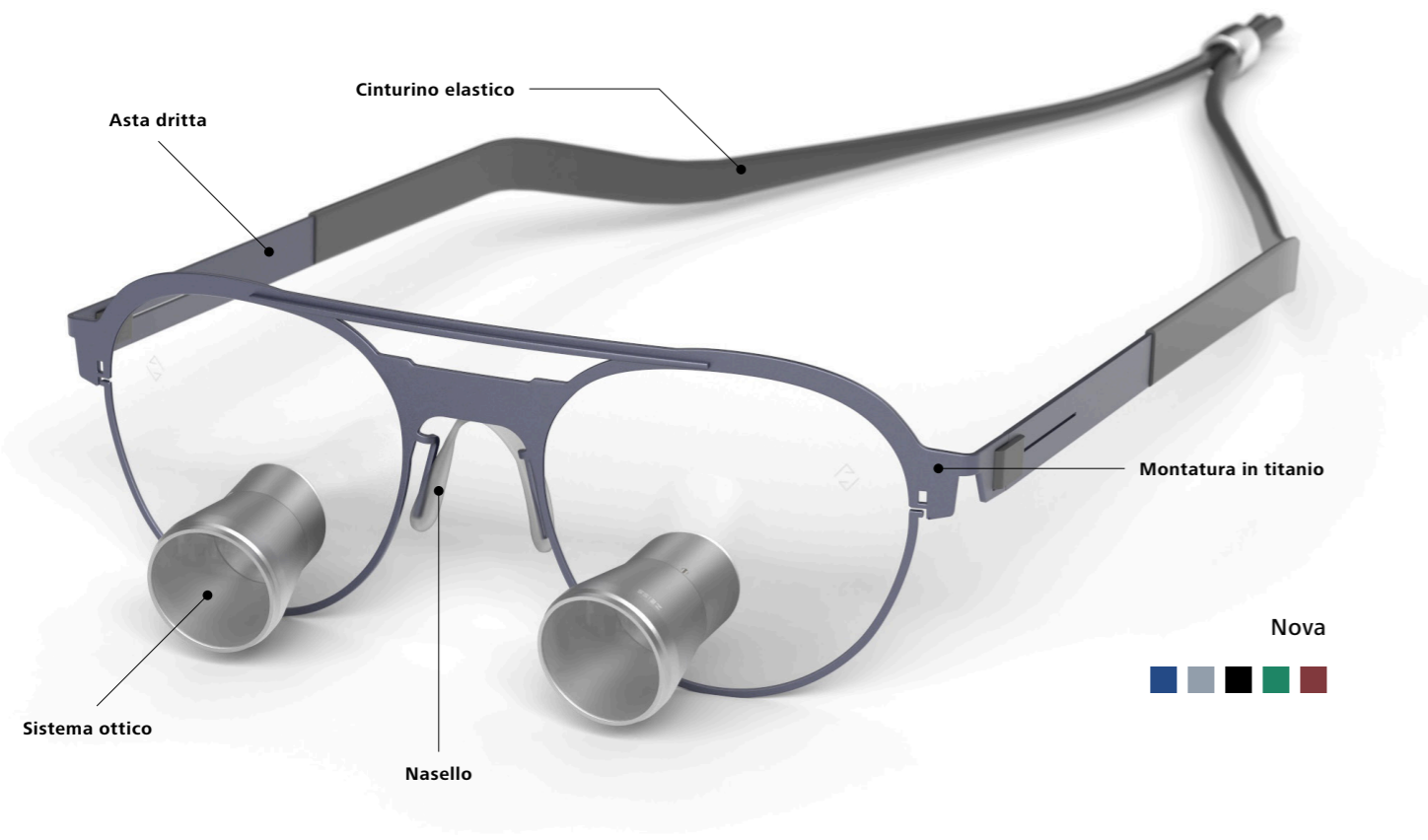

EyeMag Classic – Caratteristiche ottiche

Ingrandimento	2,0x					2,5x				
Distanza di lavoro in mm	300	350	400	450	500	350	400	450	500	550
Campo visivo in mm	52	60	68	76	84	49	55	61	67	74

Scegli tra queste diverse opzioni di montature e colori:





ZEISS EyeMag Smart

Con un ingrandimento di 2,5x, il sistema ingrandente ad uso medicale ZEISS EyeMag Smart fornisce immagini delle strutture anatomiche con un'eccellente resa cromatica. È dotato di ottiche galileiane che possono essere facilmente ribaltate quando non necessarie, offrendo a chi le indossa una visione libera da ostacoli. Disponibili con montatura leggera in titanio in varie forme e colori o sportiva, ZEISS EyeMag Smart vantano

un'ampia gamma di impostazioni per inclinazione e visualizzazione angolata, oltre ad una calzata comoda ed ergonomica. Facile e veloce da regolare, l'impostazione della lente rimane stabile nella posizione selezionata. Ciò fa di ZEISS EyeMag Smart un'ottima scelta per gli utenti che necessitano di un sistema ingrandente compatto e facile da utilizzare.

EyeMag Smart – Caratteristiche ottiche

Ingrandimento	2,5x				
Distanza di lavoro in mm	300	350	400	450	550
Campo visivo in mm	67	77	86	96	115

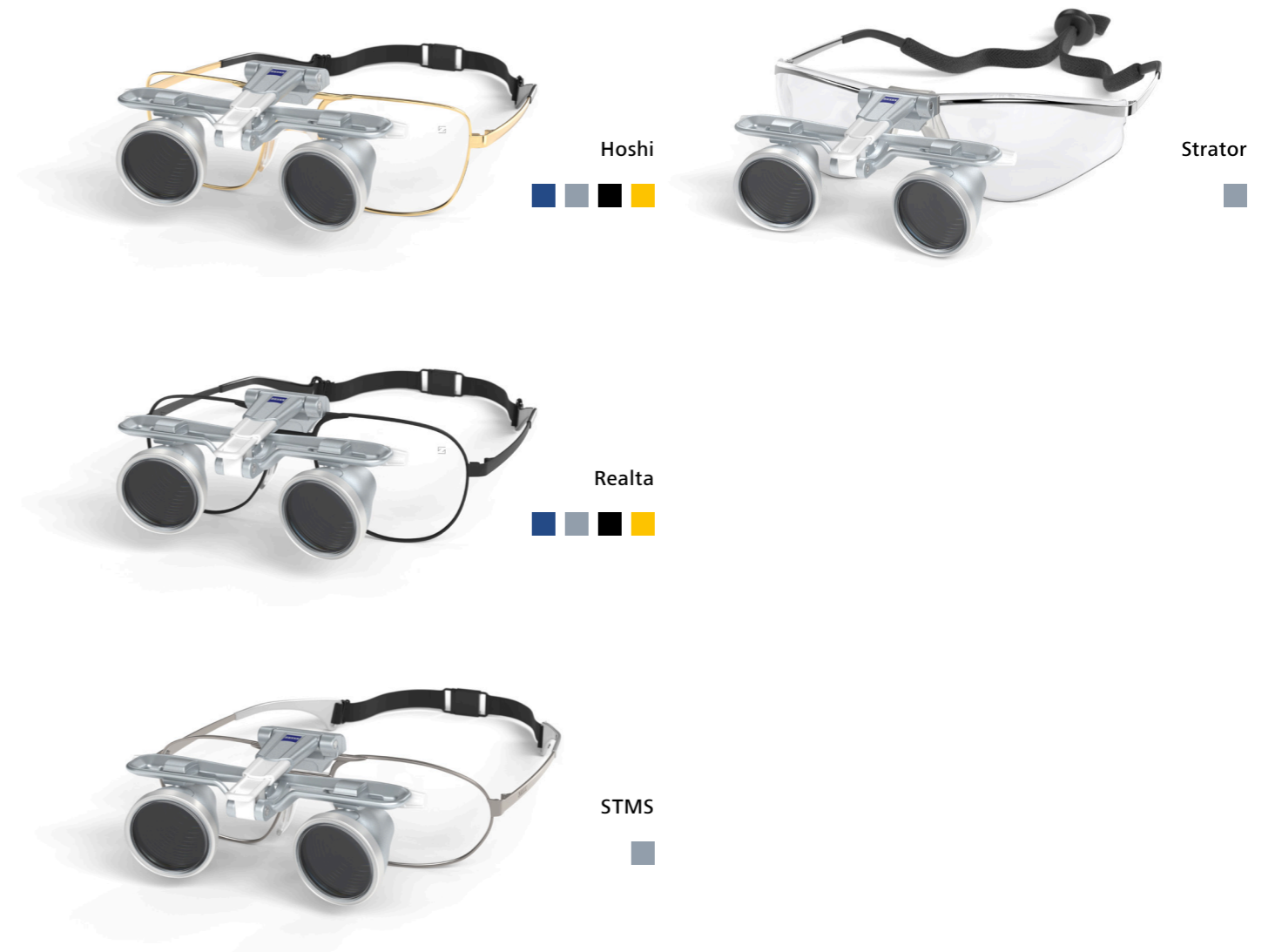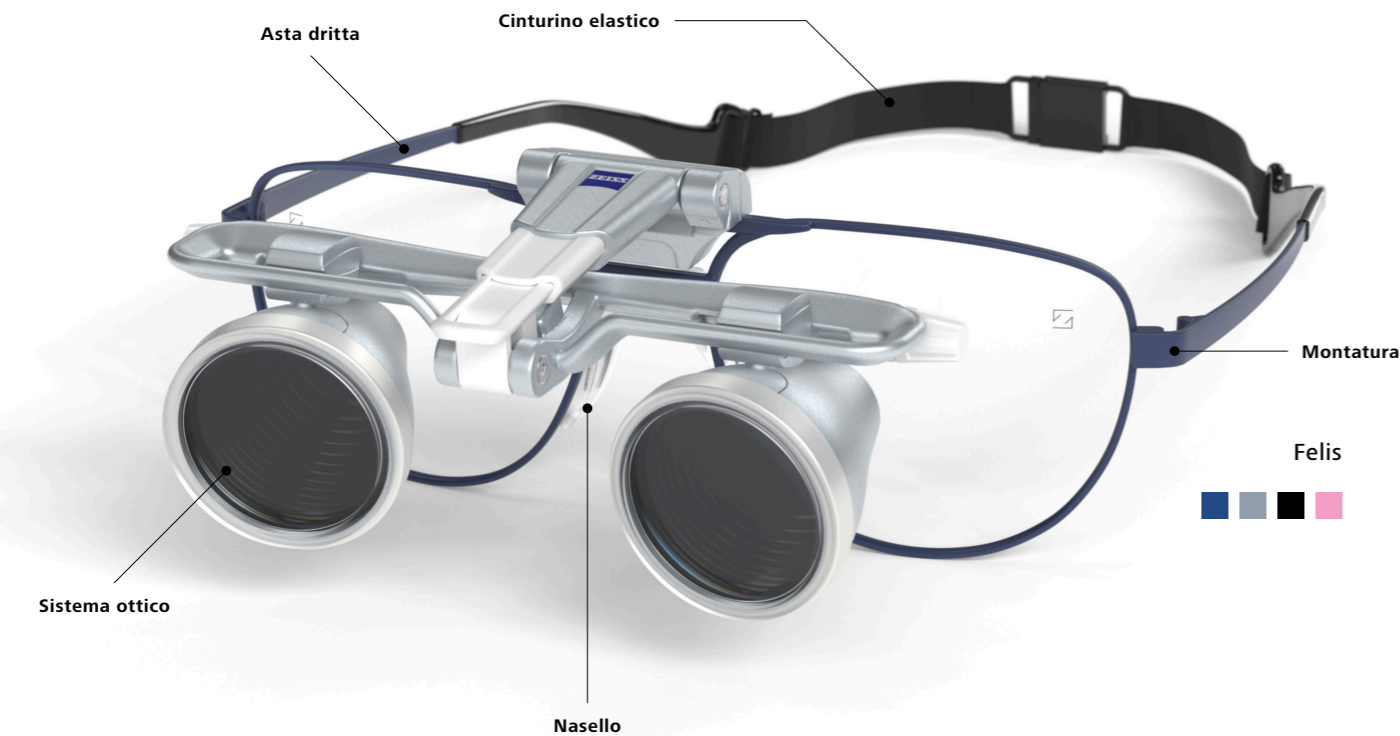

ZEISS EyeMag Smart TTL


Con un ingrandimento di 2,5x o 3,0x e un'ottica galileiana, ZEISS EyeMag Smart TTL offre un ampio campo visivo con un'ottima risoluzione dei dettagli e una dettagliata profondità di campo sull'intera area di applicazione. Ogni

sistema è una soluzione su misura basata sulle tue esigenze personali graduabile a seconda della tua prescrizione. È ideale per gli utenti con esigenze di ingrandimento meno elevate che desiderano un sistema TTL personalizzato.

EyeMag Smart TTL – Caratteristiche ottiche

Ingrandimento	2,5x					3,0x				
Distanza di lavoro in mm	350	400	450	500	550	350	400	450	500	550
Campo visivo in mm	70	78	87	96	105	54	60	80	92	104

Scegli tra queste diverse opzioni di montature e colori:

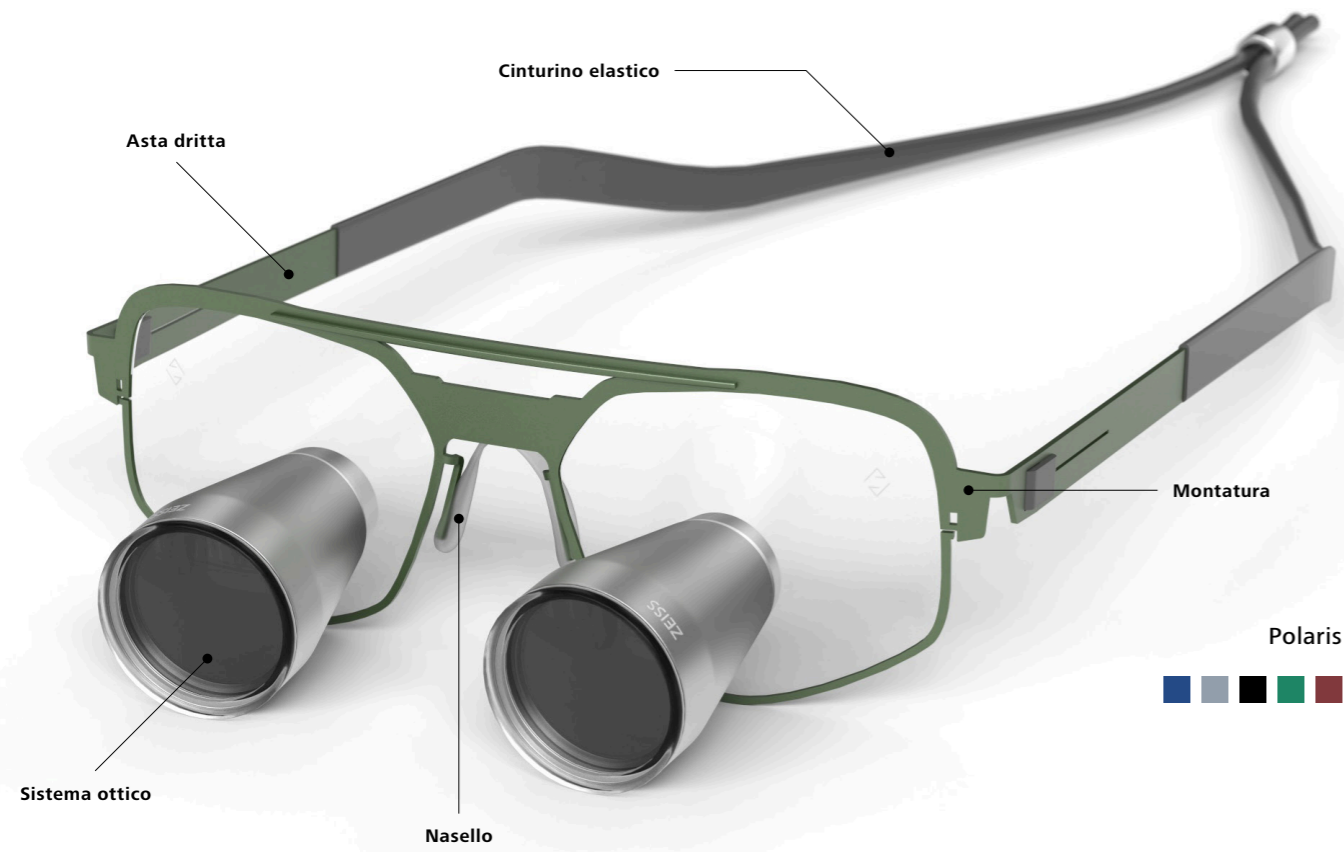



ZEISS EyeMag Pro

Gli utenti esperti con esigenze di ingrandimento più elevate apprezzeranno le capacità di visualizzazione avanzate di ZEISS EyeMag Pro con ottica kepleriana. Disponibili con diversi livelli d'ingrandimento da 3,2x a 6,0x. Offrono immagini stereoscopiche ad elevato contrasto con nitidezza a tutto campo per un riconoscimento e una differenziazione ottimali dei dettagli. Quando l'ingrandimento non è necessario, basta sollevare il sistema ottico. Applicati su una montatura

leggera in titanio (ZEISS EyeMag Pro F) o su un sistema di supporto ad archetto (ZEISS EyeMag Pro S), i sistemi ingrandenti ad uso medico offrono un'ampia gamma di impostazioni di inclinazione e angolazione, favorendo una posizione di lavoro confortevole ed ergonomica. Facile e veloce da regolare, l'impostazione della lente rimane stabile nella posizione selezionata.

EyeMag Pro F/S – Caratteristiche ottiche

Ingrandimento	3,2x	3,3x	3,5x	3,6x	4,0x				4,3x	4,5x	5,0x			6,0x	
	500	450	400	350	300	450	500	550	400	350	300	500	550	500	550
Campo visivo in mm	115	100	86	71	56	81	93	99	68	56	44	72	72	63	65

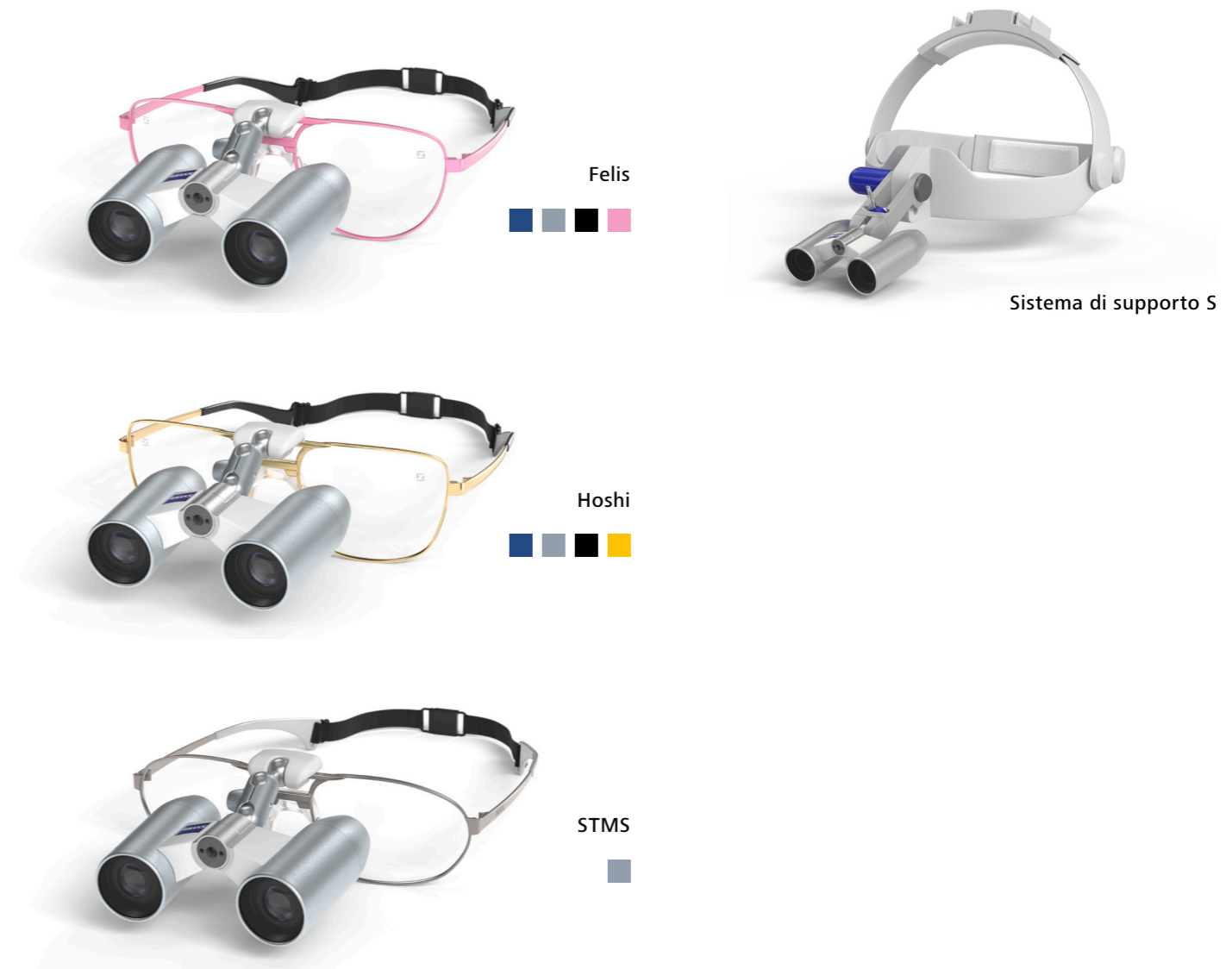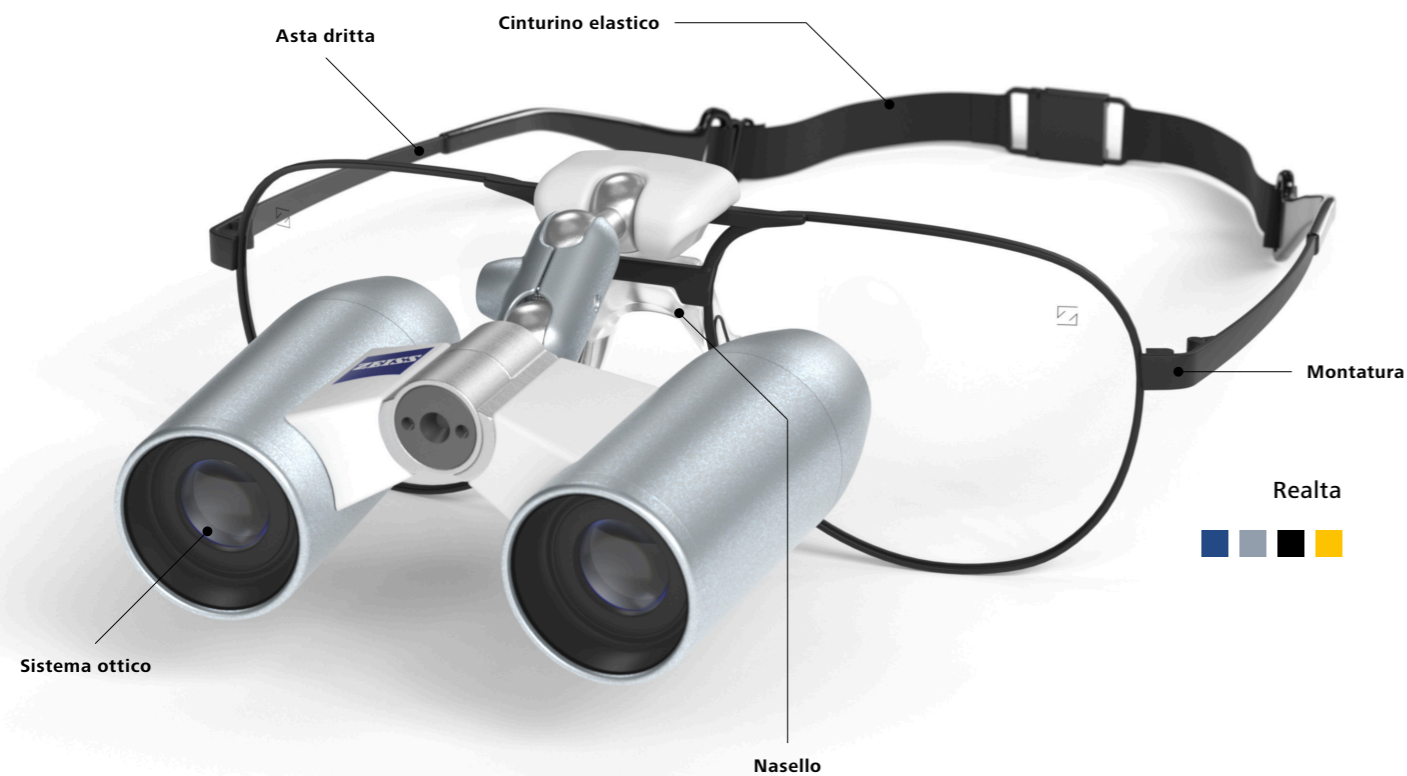


ZEISS EyeMag Light II


La soluzione ZEISS EyeMag Light II fornisce l'intensità luminosa necessaria per scorgere i dettagli in modo ottimale. In combinazione con i sistemi ingrandenti ad uso medicale ZEISS EyeMag, l'illuminazione LED consente una visualizzazione nitida e chiara di dettagli e strutture molto piccole simulando la luce diurna e distribuendola in modo uniforme.

La fornitura standard include due batterie ricaricabili ad alta capacità e una base di ricarica per garantire un utilizzo senza interruzioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La struttura compatta, facile da trasportare ed ergonomica, ottimizza il comfort con l'impiego quotidiano per diversi tipi di procedure.

Illuminazione flessibile per una totale libertà di movimento

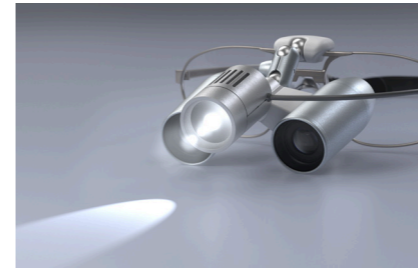


In combinazione con i sistemi ingrandenti ad uso medicale ZEISS EyeMag, EyeMag Light II offre un'illuminazione quasi coassiale, riducendo al minimo la formazione di ombre.

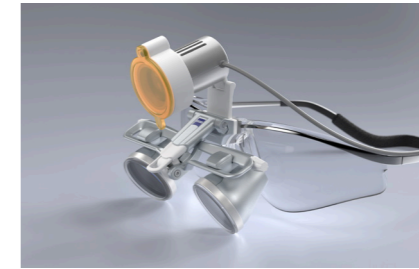


Il filtro arancione ad inserimento per EyeMag Light II previene la polimerizzazione precoce dei materiali compositi.



Due pacchi batterie ricaricabili con una comoda base di ricarica assicurano un'operatività senza interruzioni.

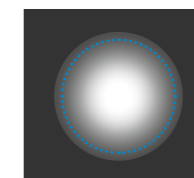

Sistema convenzionale

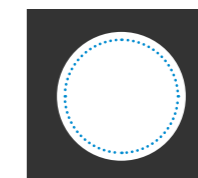

ZEISS EyeMag Light II

A differenza delle illuminazioni con configurazioni convenzionali dell'obiettivo, ZEISS EyeMag Light II garantisce un'illuminazione uniforme e potente dell'intero campo visivo.

..... Campo visivo

Configuratore prodotto

Personalizza il tuo sistema ingrandente ad uso medicale EyeMag

Il tuo sistema ingrandente è personale come un paio di occhiali: deve fornire ottime prestazioni ottiche, adattandosi allo stesso tempo al tuo stile. Il configuratore è stato creato per darti una panoramica dei sistemi ingrandenti ZEISS EyeMag.

Seleziona il tipo di sistema ingrandente che preferisci e configura la montatura e il colore in base alle tue preferenze.

Trova il sistema ingrandente più adatto a te:

zeiss.ly/configurator



Configurazioni e accessori

Gamma EyeMag di ZEISS

Prodotto	ZEISS EyeMag Classic	ZEISS EyeMag Smart	ZEISS EyeMag Smart TTL	ZEISS EyeMag Pro F	ZEISS EyeMag Pro S
Ottica	Galileiana	Galileiana	Galileiana	Kepleriana	Kepleriana
Montatura	Hoshi Felis Realta STMS Nova Polaris Sirius	Hoshi Felis Realta STMS Strator	Hoshi Felis Realta STMS Nova Polaris Sirius	Hoshi Felis Realta STMS	Sistema di supporto S
Tappi protettivi	–	●	●	●	●
Protezione da contatto	–	●	–	●	●
Schermi laterali*	○	○	○	○	–
Soft case	●	●	●	●	●
Custodia	●	●	●	●	●
Panno in microfibra per la pulizia	●	●	●	●	●
Spray per la pulizia	●	–	●	–	–
Prescrizione personale**	○	○	○	○	–

* Disponibile solo per montature specifiche. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante di vendita.

** Non disponibile per la montatura Strator. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante di vendita.

● inclusa ○ possibile – non disponibile

ZEISS EyeMag Light II – Confezione standard di ZEISS EyeMag Light II

Alloggiamento lampadina	Potente sorgente di luce LED con controllo di temperatura integrato
Unità di controllo	Controllo dell'intensità a 3 livelli (100%, 66% e 33%), indicatore del livello di carica e clip per cintura
Adattatore per sistemi ingrandenti ZEISS	Per collegare l'illuminazione LED ZEISS EyeMag Light II a EyeMag Smart e EyeMag Pro F/S
Clip cavo	Per collegare il cavo della lampada al supporto
Soft case	Protezione antiurto di elevata qualità per la sorgente luminosa e gli accessori
Filtro arancione girevole per ZEISS EyeMag Light II	Per prevenire l'indurimento prematuro dei materiali compositi per applicazioni dentali
Intensità luminosa	Fino a 50.000 Lux (ad una distanza di 300 mm)
Temperatura tipica del colore	Simile alla luce diurna (ca. 5.700 Kelvin)
Peso della testa di illuminazione	19 g (0,6 oz)
2 batterie	2 batterie agli ioni di litio per una ricarica veloce
Caricabatteria	Controllato da processore con adattatore di alimentazione specifico dei vari paesi
Tempo di funzionamento	Grazie al breve tempo di ricarica, le due batterie consentono l'uso continuativo della luce per l'intera giornata di lavoro



EyeMag medical loupes
EyeMag Light II



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germania
www.zeiss.com/loupes
www.zeiss.com/med/contacts

it-INT_30_010_0066V CZ-V/2026 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati.
Il contenuto della brochure può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. EyeMag è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e/o in altri paesi.
© Carl Zeiss Meditec AG. 2026. Tutti i diritti riservati.