

Tratamiento con precisión.



Lupas médicas ZEISS EyeMag



zeiss.com/loupes

Seeing beyond



Lupas médicas ZEISS EyeMag



Óptica renovada

Ver en detalle las diminutas estructuras anatómicas es esencial para el éxito del tratamiento. Los usuarios esperan ver imágenes claras y nítidas. Las ópticas de alta calidad de ZEISS permiten obtener una visualización precisa y con el mínimo detalle. Ofrecen un excelente rendimiento óptico y una amplia gama de aumentos para cubrir todas sus necesidades.



Elección personal

Al igual que un par de gafas, las lupas médicas no son solo una herramienta, sino también una manifestación de su estilo personal. Elija entre una amplia variedad de monturas ligeras en distintos colores y complemente su lupa médica con la potente iluminación de ZEISS EyeMag Light II.



Manejo intuitivo

Las lupas médicas de ZEISS le permiten adaptarse a cada situación. Simplemente colóquese sus lupas médicas personalizadas y estará listo para empezar. Con las lupas médicas abatibles, la óptica puede recolocarse con precisión mediante un único ajuste o incluso levantarse por completo para mantener el contacto visual con el paciente cuando no se necesita aumento.

Lupas médicas ZEISS EyeMag

Tan únicas como sus necesidades

Las lupas médicas EyeMag® de ZEISS ofrecen un excelente rendimiento óptico a usuarios con y sin experiencia. Las herramientas de visualización proporcionan una excelente claridad de imagen y profundidad de campo en toda el

área de tratamiento, y pueden equiparse con iluminación LED. Cómodas y fáciles de usar, las lupas médicas ZEISS EyeMag combinan un diseño elegante y funcional en una amplia gama de distancias de trabajo y de niveles de aumento.



ZEISS EyeMag Smart TTL

- A través de la lente, los sistemas ópticos se montan en las lentes portadoras
- Con aumento de 2,5x o 3,0x
- Disponibles con monturas de titanio en diferentes formas y colores
- Valores de graduación individuales dentro del sistema
- Ideal para usuarios con requisitos de aumento básicos y que necesitan un gran campo de visión



ZEISS EyeMag Classic

- Lupa médica individualizada en la que los sistemas ópticos están montados en la superficie de las lentes portadoras
- Con aumento de 2,0x o 2,5x
- Disponibles con monturas de titanio en diferentes formas y colores
- Valores de graduación individuales dentro del sistema
- Modelo básico a un precio atractivo, ideal para usuarios con requisitos de aumento básicos o estudiantes



ZEISS EyeMag Light II

- En combinación con el sistema óptico de alta calidad de ZEISS, la potente ZEISS EyeMag Light II permite reconocer los detalles de manera nítida y observar sin alteración las estructuras minúsculas
- Ajuste perfecto con todas las lupas médicas ZEISS EyeMag



ZEISS EyeMag Smart

- Abatible
- Con aumento de 2,5x
- Disponible con monturas de titanio para gafas en diferentes formas y colores, o con montura deportiva
- ZEISS puede integrar directamente los valores de graduación individuales
- Ideal para usuarios con requisitos de aumento básicos y que necesitan un cambio de ángulo flexible durante su uso




ZEISS EyeMag Pro F y ZEISS EyeMag Pro S

- Abatible
- Con aumento de 3,2x a 6,0x
- Disponible con monturas de titanio para gafas en diferentes formas y colores, o con una cómoda banda de sujeción para la cabeza
- ZEISS puede integrar directamente los valores de graduación individuales
- Ideal para usuarios con necesidades de gran aumento y que requieren un cambio de ángulo flexible durante su uso

ZEISS EyeMag Classic

Disponibles con aumentos de 2,0x o 2,5x y óptica galileana, ZEISS EyeMag Classic es el modelo más ligero de todas las lupas médicas de ZEISS. Montados en la superficie de las lentes portadoras, los sistemas ópticos personalizados permiten visualizar con nitidez

los detalles más minúsculos, así como las estructuras, y se adaptan a su graduación. ZEISS EyeMag Classic es un sistema ideal para estudiantes de medicina y profesionales sin experiencia previa en lupas y que prefieren un modelo especialmente ligero.

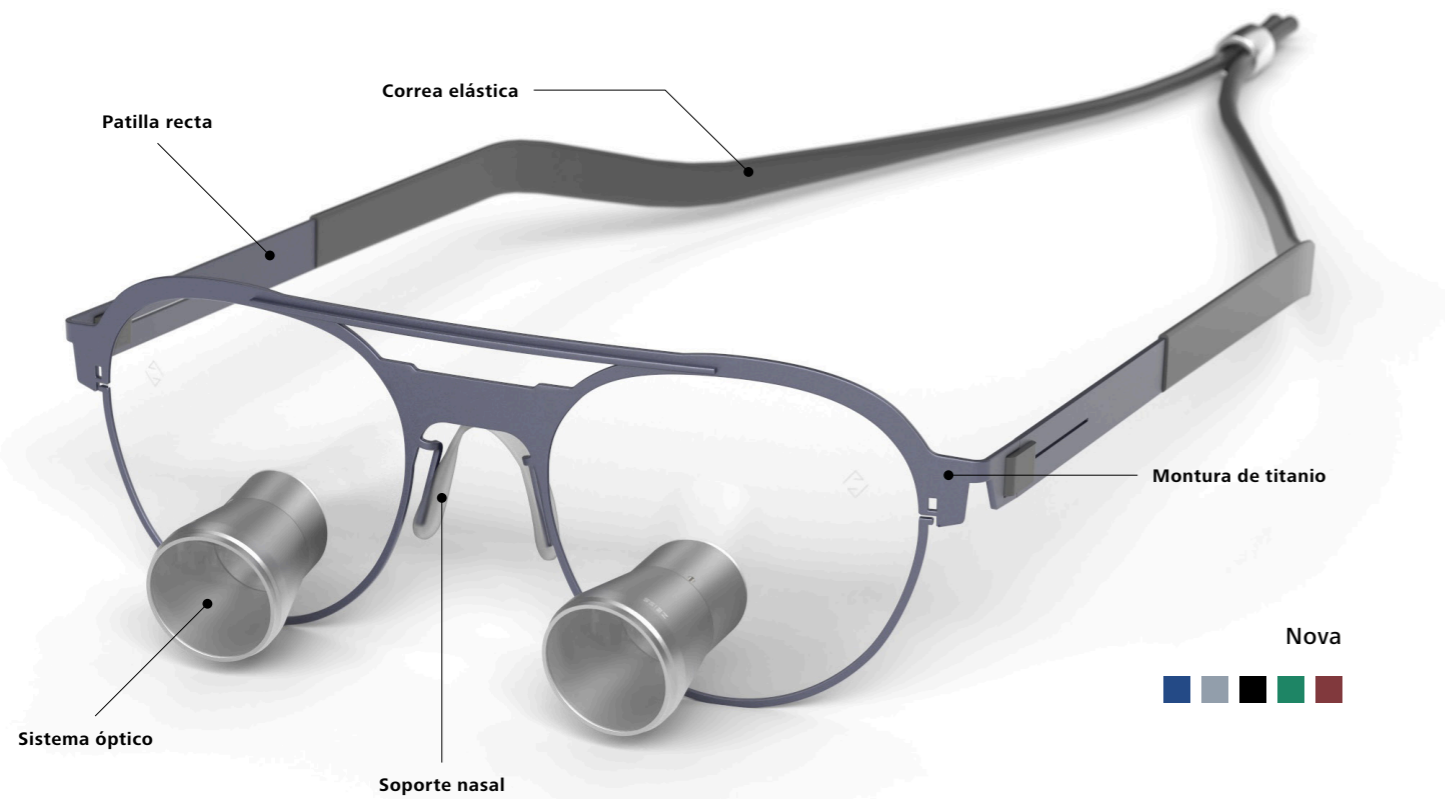

EyeMag Classic: propiedades ópticas

Aumento	2,0x					2,5x				
Distancia de trabajo en mm	300	350	400	450	500	350	400	450	500	550
Campo de visión en mm	52	60	68	76	84	49	55	61	67	74

Elija entre las distintas opciones de montura y color:





ZEISS EyeMag Smart

Con el aumento 2,5x, las lupas médicas ZEISS EyeMag Smart ofrecen imágenes con una excelente reproducción cromática de las estructuras anatómicas. Cuentan con una óptica galileana que, si no se requiere aumento, puede plegarse y ofrece al usuario una visión sin obstáculos. Disponible con monturas ligeras de titanio en diferentes formas y colores o con montura deportiva, ZEISS EyeMag Smart ofrece una amplia

variedad de ajustes para una inclinación y un ángulo de visión flexibles, además de un ajuste cómodo y ergonómico. Gracias al ajuste rápido y sencillo, los parámetros de la lupa médica permanecen estables en la posición seleccionada. El resultado: ZEISS EyeMag Smart es una fantástica elección para los usuarios que necesiten unas lupas médicas compactas y fáciles de manejar.

EyeMag Smart: propiedades ópticas


Aumento	2,5x				
Distancia de trabajo en mm	300	350	400	450	550
Campo de visión en mm	67	77	86	96	115

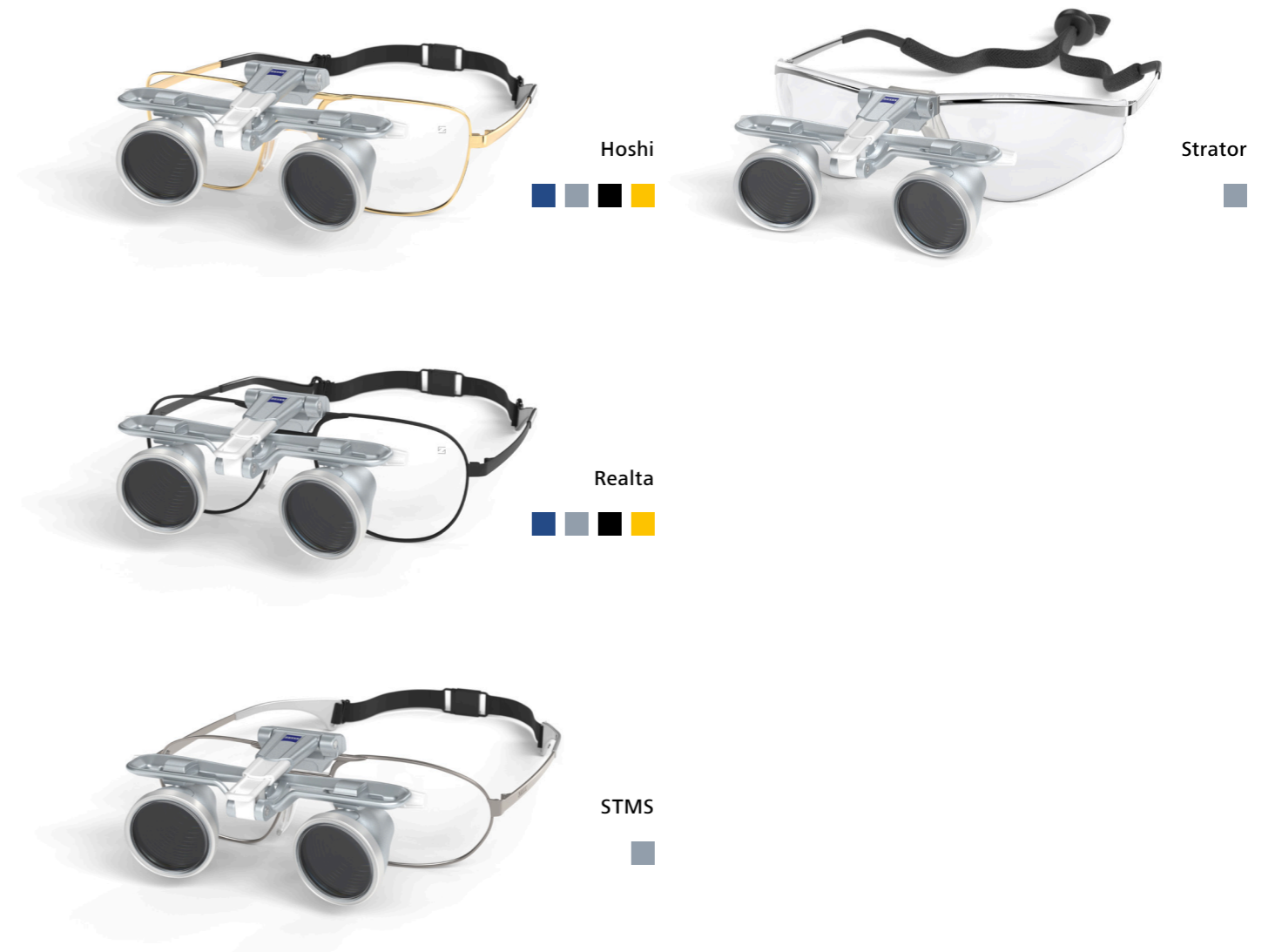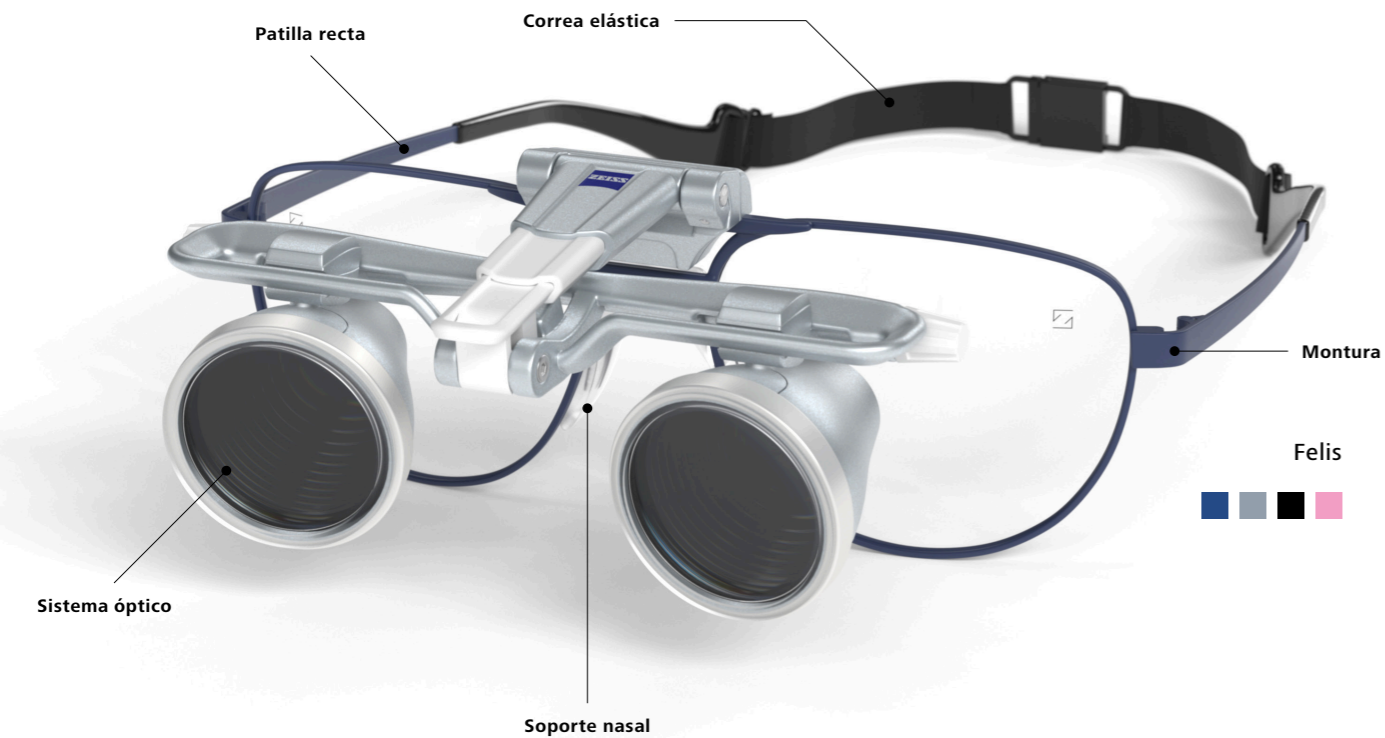

ZEISS EyeMag Smart TTL

Con aumento de 2,5x o 3,0x y óptica galileana, la ZEISS EyeMag Smart TTL proporciona un gran campo de visión con una excelente resolución de los detalles y una gran profundidad de campo en toda el área de aplicación. Cada sistema es una

solución a medida, basada en los datos individuales del usuario, y puede incluir la graduación personal si es necesario. Es ideal para usuarios con necesidades de bajo aumento que quieren un sistema TTL (a través de la lente) personalizado.

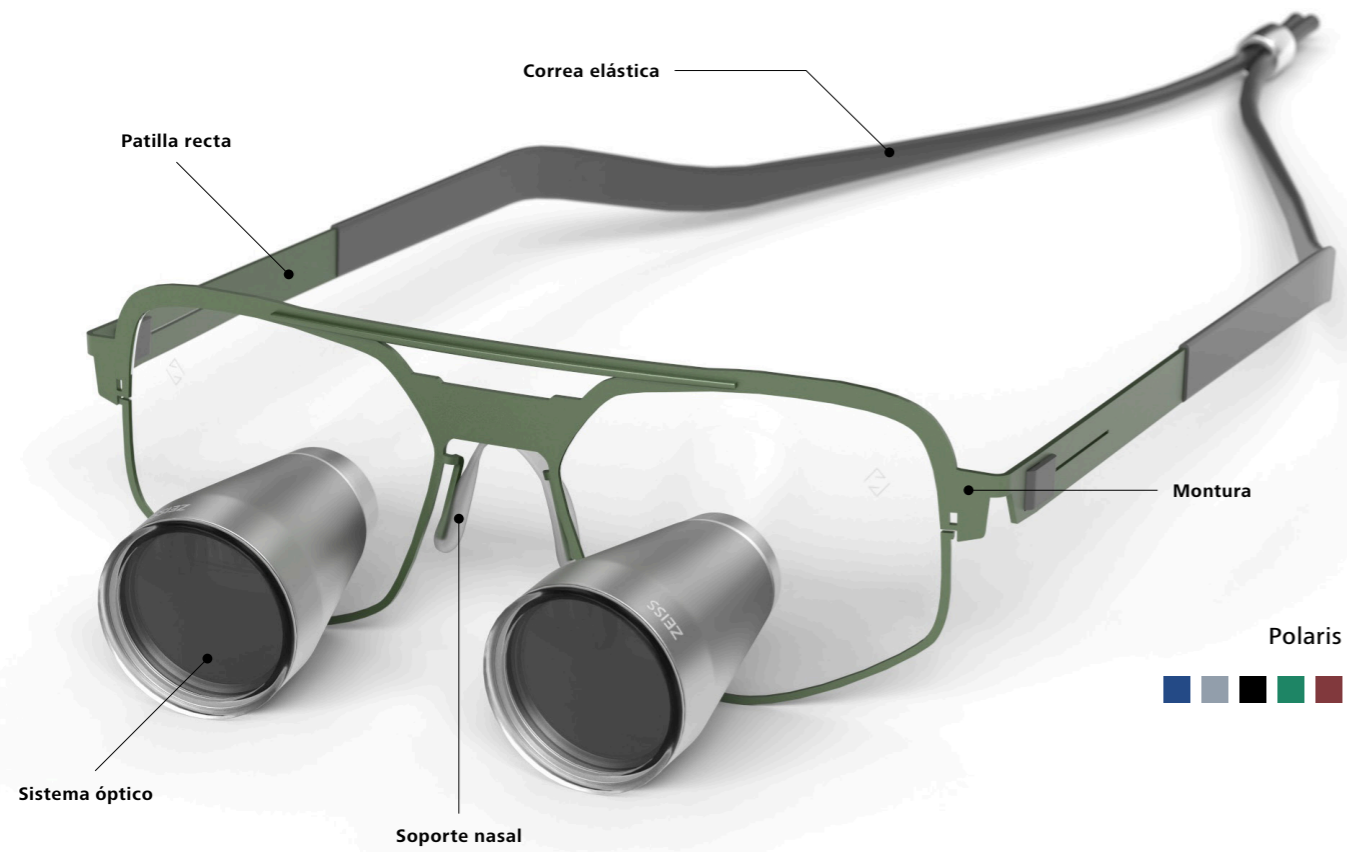

EyeMag Smart TTL: propiedades ópticas

Aumento	2,5x					3,0x				
Distancia de trabajo en mm	350	400	450	500	550	350	400	450	500	550
Campo de visión en mm	70	78	87	96	105	54	60	80	92	104

Elija entre las distintas opciones de montura y color:





ZEISS EyeMag Pro

Los usuarios con experiencia y que requieran grandes aumentos agradecerán las avanzadas opciones de visualización de ZEISS EyeMag Pro con óptica de Kepler. ZEISS EyeMag Pro está disponible en distintos niveles de aumento, desde 3,2x hasta 6,0x. El sistema proporciona imágenes estereoscópicas de alto contraste con nitidez hasta los bordes, lo que permite reconocer y la diferenciar detalles con claridad. Además, el sistema óptico puede abatirse

fácilmente cuando no se necesita aumento. Gracias tanto a la montura ligera de titanio (ZEISS EyeMag Pro F) como al sistema portador con cinta para la cabeza (ZEISS EyeMag Pro S), las lupas médicas ofrecen una gran variedad de ajustes para una amplia visión inclinada y angular, lo que garantiza una posición cómoda y ergonómica. Los ajustes pueden realizarse de manera rápida y sencilla, y permanecen estables en la posición seleccionada.

EyeMag Pro F/S: propiedades ópticas

Aumento	3,2x	3,3x	3,5x	3,6x	4,0x				4,3x	4,5x	5,0x			6,0x	
Distancia de trabajo en mm	500	450	400	350	300	450	500	550	400	350	300	500	550	500	550
Campo de visión en mm	115	100	86	71	56	81	93	99	68	56	44	72	72	63	65

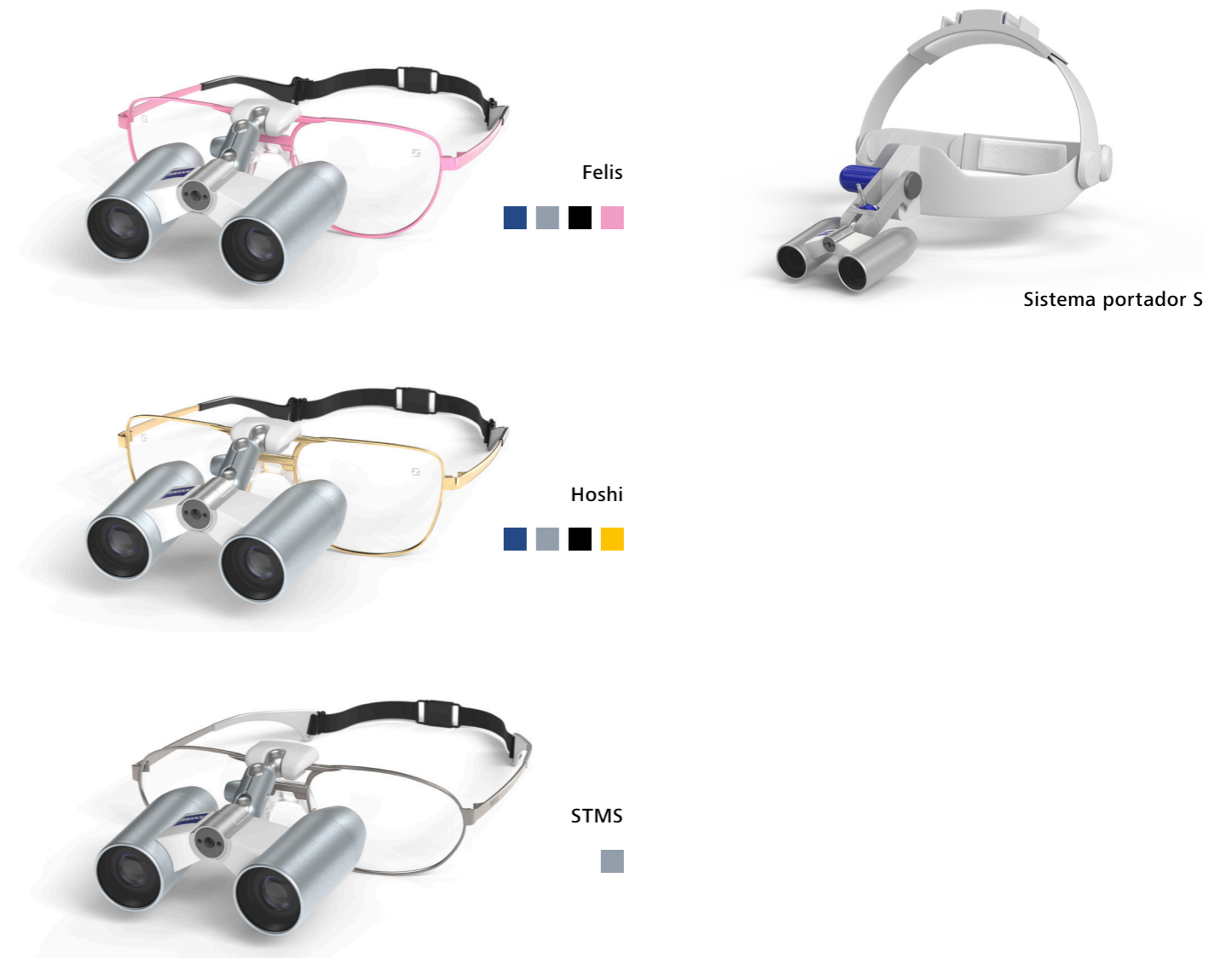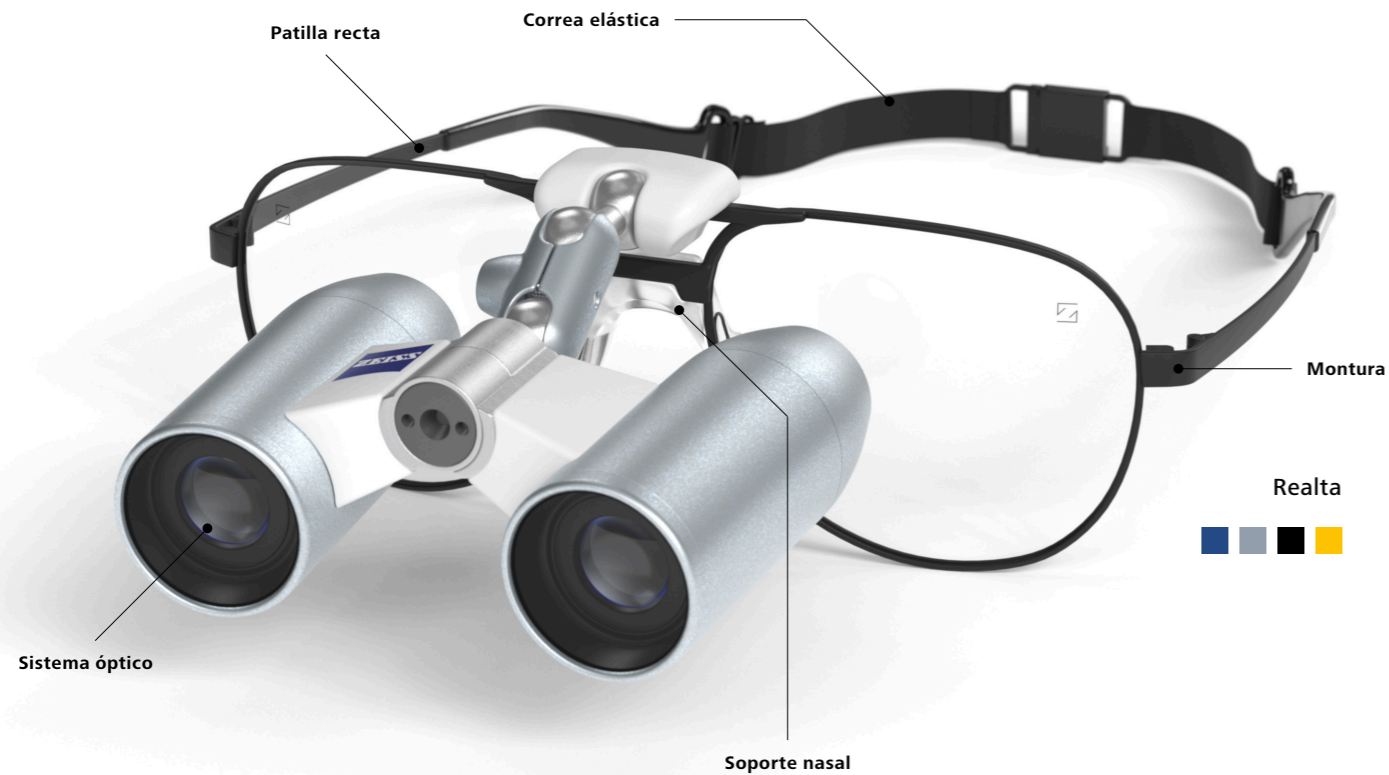

ZEISS EyeMag Light II


La potente luz de ZEISS EyeMag Light II proporciona una iluminación intensa para reconocer más detalles. Combinada con las lupas médicas ZEISS EyeMag, la iluminación LED favorece una visualización clara y nítida de estructuras y detalles minúsculos, gracias a su gran similitud con la luz natural y a la distribución uniforme de la luz. En el paquete estándar se incluyen dos potentes

juegos de baterías recargables y una cómoda base de carga que permiten trabajar de forma prácticamente ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su diseño compacto, portátil y ergonómico proporciona el máximo confort para el uso diario para una amplia gama de procedimientos.

Iluminación a la carta, flexible y móvil



En combinación con las lupas médicas ZEISS EyeMag, EyeMag Light II ofrece luz casi coaxial, lo que evita en gran medida la formación de sombras.

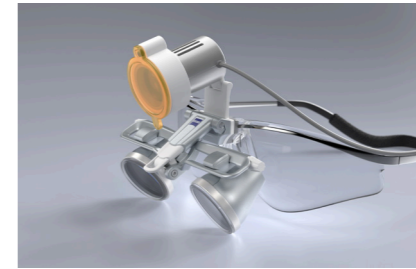

El filtro naranja giratorio para ZEISS EyeMag Light II evita el endurecimiento prematuro de los materiales compuestos.




Dos juegos de baterías recargables con una cómoda base de carga permiten trabajar de forma prácticamente ininterrumpida.




Botón sencillo
Control de intensidad de 3 pasos. Se pueden cambiar los ajustes de intensidad de la luz en pasos de 33 %, 66 % y 100 %

Indicador de nivel de carga


Práctica pinza de sujeción para una plena libertad de movimiento

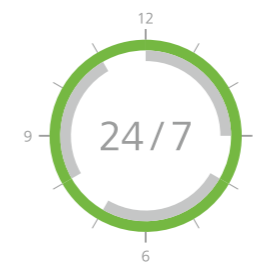

■ Tiempo de funcionamiento de la batería
■ Tiempo de carga de la batería

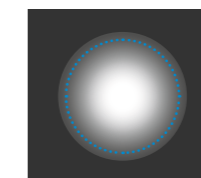

Sistema convencional

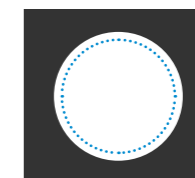

ZEISS EyeMag Light II

A diferencia de las iluminaciones con configuraciones de lentes convencionales, ZEISS EyeMag Light II, con su campo iluminado de forma clara y nítida, ofrece una iluminación uniforme y potente de todo el campo de visión de las lupas de ZEISS.

..... Campo de visión

Configurador de productos

Personalice su lupa médica EyeMag

Una lupa médica es tan personal como una gafa: debe ofrecer un gran rendimiento óptico y, al mismo tiempo, adaptarse a su estilo personal. Para ayudarle a hacerse una idea general del catálogo de lupas médicas ZEISS EyeMag, hemos creado el configurador de productos.

Seleccione el tipo de lupa médica del que desea obtener más información y configure la montura y el color según sus preferencias.

Encuentre la lupa médica que mejor se adapte a sus necesidades:

zeiss.ly/configurator



Configuraciones y accesorios

Familia EyeMag de ZEISS

Producto	ZEISS EyeMag Classic	ZEISS EyeMag Smart	ZEISS EyeMag Smart TTL	ZEISS EyeMag Pro F	ZEISS EyeMag Pro S
Óptica	Galileana	Galileana	Galileana	Kepler	Kepler
Monturas	Hoshi Felis Realta STMS Nova Polaris Sirius	Hoshi Felis Realta STMS Strator	Hoshi Felis Realta STMS Nova Polaris Sirius	Hoshi Felis Realta STMS	Sistema portador S
Tapas protectoras	–	●	●	●	●
Protección de contacto	–	●	–	●	●
Protecciones laterales*	○	○	○	○	–
Estuche blando	●	●	●	●	●
Bolsa para la lupa	●	●	●	●	●
Paño de microfibra para limpiar lentes	●	●	●	●	●
Spray de limpieza de lentes	●	–	●	–	–
Graduación personal**	○	○	○	○	–

* Disponible únicamente para determinadas monturas. Para más información, póngase en contacto con su representante comercial.

** No disponible para la montura Strator. Para más información, póngase en contacto con su representante comercial.

● incluido ○ posible – no disponible

ZEISS EyeMag Light II – Paquete estándar de ZEISS EyeMag Light II

Carcasa de bombilla	Potente fuente de luz LED con control de temperatura integrado
Unidad de control	Con control de intensidad de 3 pasos (en tres niveles: 100 %, 66 % y 33 %), indicador de nivel de carga y pinza de sujeción
Adaptador para lupas ZEISS	Para acoplar la iluminación LED ZEISS EyeMag Light II a EyeMag Smart y EyeMag Pro F/S
Pinza de cable	Para conectar el cable de la lámpara al sistema portador
Estuche blando	Protección de alta calidad contra golpes para la fuente de luz y los accesorios
Filtro naranja giratorio para ZEISS EyeMag Light II	Para evitar el endurecimiento prematuro de los materiales compuestos para aplicaciones dentales
Intensidad de la luz	Hasta 50 000 Lux (a una distancia de 300 mm)
Temperatura típica del color	Similar a la luz diurna (aprox. 5700 Kelvin)
Peso del cabezal de iluminación	19 g (0,6 oz)
2 baterías	2 baterías de iones de litio para una carga rápida
Cargador de batería	Procesador controlado con un adaptador de corriente específico para cada país
Tiempo de funcionamiento	Gracias al tiempo reducido de carga, las dos baterías permiten un uso continuo de la luz durante toda la jornada laboral



EyeMag medical loupes
EyeMag Light II



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.zeiss.com/loupes
www.zeiss.com/med/contacts

es-INT_30_010_0066V CZ-V/2026 Edición internacional: en venta solo en países seleccionados.
El contenido de este folleto puede diferir del estado actual de homologación del producto o del servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. EyeMag es una marca comercial o marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG o de otras empresas del Grupo ZEISS de Alemania y/o de otros países.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2026. Reservados todos los derechos.