

Simplification du flux de tâches en chirurgie de la cataracte.



ZEISS EQ Workplace



www.zeiss.com/eq-workplace


Seeing beyond

Présentation

de ZEISS EQ Workplace

Le nouvel outil EQ Workplace® de ZEISS est le dernier-né de la plateforme ZEISS Cataract Suite qui vous aide à simplifier le flux des tâches en chirurgie réfractive de la cataracte. Des phases de biométrie, de calcul, de sélection et de commande de LIO à la programmation des interventions chirurgicales et à la collecte des données post-opératoires, ZEISS EQ Workplace est conçu pour vous aider à :

- Gagner du temps pendant les procédures pré-opératoires
- Mieux vous protéger contre les erreurs médicales
- Accéder à vos données où que vous soyez
- Personnaliser vos constantes de LIO

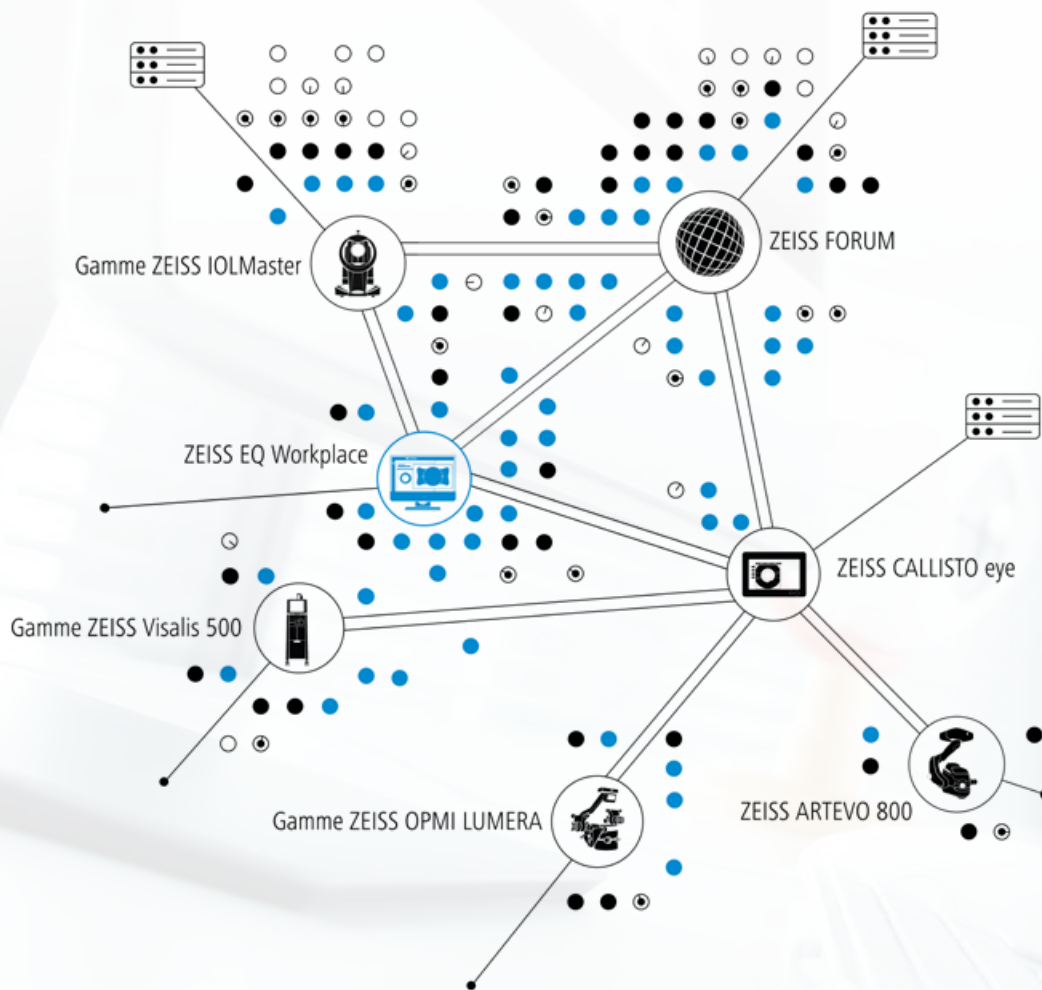



Gagnez du temps pendant les procédures pré-opératoires

Prenez des décisions éclairées et gagnez du temps

Basé sur FORUM® de ZEISS, ZEISS EQ WORKPLACE permet de transférer en un clic des données vers et depuis des instruments et de renseigner automatiquement des informations, afin de gagner du temps avant l'opération. Accédez à distance aux données depuis IOLMaster® de ZEISS et vos dispositifs de diagnostic compatibles DICOM. Calculez et sélectionnez des LIO à partir d'un examen détaillé de l'ensemble des données de diagnostic importantes sur un poste unique, à tout moment et en tout lieu.

Planifiez à distance vos interventions chirurgicales

ZEISS EQ Workplace se connecte directement à votre système CALLISTO eye® de ZEISS et permet de préparer vos fonctions d'assistance chirurgicale depuis n'importe quel poste de votre établissement. Lorsque vous commencez votre intervention chirurgicale avec ZEISS CALLISTO eye, toutes les fonctions d'assistance importantes comme le rhéxis, les incisions et les axes cibles pour les LIO toriques sont déjà prééglées. Votre équipe et vous-même gagnez un temps précieux au bloc opératoire.



Protection renforcée contre les erreurs médicales

Le journal de données sécurisé de ZEISS EQ Workplace vous offre une protection renforcée contre le risque d'erreur humaine. ZEISS vous procure un niveau supplémentaire de protection contre les erreurs médicales grâce à la simplification et à l'automatisation des processus suivants :

- Les données biométriques fournies par ZEISS IOLMaster sont transférées automatiquement vers ZEISS EQ Workplace et sont renseignées dans les champs de données pertinents pour le calcul et la sélection de LIO.
- Les données de LIO sont copiées directement dans votre commande de LIO.
- Pour les utilisateurs de ZEISS CALLISTO eye, les paramètres de LIO (p. ex. axe cible) et les autres données d'assistance chirurgicale sont également transférés automatiquement.
- Par ailleurs, il est très facile de vérifier que la LIO livrée correspond bien à celle sélectionnée lors de la phase pré-opératoire en comparant les informations de la LIO avec les données affichées sur l'écran de ZEISS CALLISTO eye.
- L'application ZEISS EQ Mobile pour iPhone et iPad permet aux utilisateurs de LIO ZEISS de confirmer les LIO sélectionnées en activant simplement les données de planification du patient, puis en analysant le pack de LIO disponible.

Accédez à vos données où que vous soyez

ZEISS EQ Mobile

Grâce à l'application EQ Mobile® de ZEISS pour iOS, vous accédez à tout moment et où que vous soyez aux données biométriques et aux informations pour la planification de l'intervention. ZEISS EQ Mobile charge automatiquement les données biométriques et les informations pour la planification de l'intervention dans un Cloud pour l'accès à distance depuis votre iPad ou votre iPhone. Vous avez ainsi accès aux données pertinentes où que vous soyez et ce, notamment, si vous exercez dans plusieurs établissements.

Transfert de données sans fil ponctuel vers ZEISS CALLISTO eye

Outre le transfert de données DICOM classique, ZEISS EQ Mobile permet une connexion Wi-Fi ponctuelle à ZEISS CALLISTO eye. Ainsi, pour plus de simplicité et de souplesse dans votre programme d'interventions chirurgicales, les patients peuvent être sélectionnés plus facilement et les ensembles de données des patients peuvent être transférés depuis l'application.





Personnalisez vos constantes de LIO

Consultez vos données de réfraction pré et post-opératoires sur une même interface et décidez des ensembles de données que vous voulez utiliser pour personnaliser vos constantes de LIO. Ces constantes personnalisées peuvent ensuite être utilisées pour de futurs calculs dans ZEISS EQ Workplace.

Caractéristiques techniques

Pour la version logicielle 1.6

ZEISS EQ Workplace

Le logiciel est compatible avec les versions de logiciels et systèmes suivantes	IOLMaster 500, version 7.1 ou ultérieure	
	IOLMaster 700, toutes versions	
	ATLAS 9000, toutes versions	
	FORUM, version 4.2.X	
	CALLISTO eye : Version 3.5.1 ou supérieure pour EQ Workplace, 3.6 ou supérieure pour EQ Mobile	
Serveur	Processeur Intel Core™ i5-750 ou équivalent	
	4 Go de mémoire vive (16 Go de mémoire vive si ZEISS Retina Workplace ou ZEISS Glaucoma Workplace est également installé)	
	Au moins 4 Go d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation	
	Connexion au réseau	
	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (64 bits) Windows 8.1 (64 bits) Windows 10 (64 bits)	
	Connexion Internet	
	Client	Processeur Intel Core i5-750 ou équivalent
		2 Go RAM
		Le logiciel a été optimisé pour une résolution d'écran de 1680 × 1050 pixels ou supérieure. La résolution d'écran recommandée est 1680 × 1050 pixels.
		Systèmes d'exploitation pris en charge : macOS High Sierra 10.13 macOS Mojave 10.14 macOS Catalina 10.15 Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (64 bits) Service Pack 1 Windows 7 (32 bits) Service Pack 1 Windows 8.1 (64 bits) Windows 10 (64 bits)
Logiciel de messagerie classique (p. ex. MS Outlook, Mozilla Thunderbird)		
Un logiciel de messagerie standard doit être installé sur l'ordinateur client pour préparer une commande de LIO à l'aide du logiciel.		



FORUM
CALLISTO eye
IOLMaster 700
IOLMaster 500



OPMI LUMERA
ARTEVO 800
EQ Workplace



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/eq-workplace
www.zeiss.com/med/contacts

FR_32_010_00651V Imprimé en Allemagne. CZ-V/2020 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. ATLAS, IOLMaster, FORUM, EQ Mobile, EQ Workplace, LUMERA et CALLISTO eye sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tous droits réservés.