

Tratamento com precisão.



Lupas de magnificação ZEISS EyeMag



zeiss.com/loupes

Seeing beyond



Lupas de magnificação ZEISS EyeMag



Óptica reprojeta

Enxergar detalhadamente estruturas anatômicas minúsculas é essencial para um tratamento bem-sucedido. Os usuários esperam ver imagens claras e nítidas. As ópticas de alta qualidade da ZEISS possibilitam uma apresentação visual precisa até nos mínimos detalhes. Com elas, você tem um desempenho óptico excelente e muitos níveis de magnificação que abrangem todas as necessidades.



Escolha pessoal

Igual um par de óculos, as lupas de magnificação não são apenas uma ferramenta, mas também uma demonstração do seu estilo individual. Escolha entre uma variedade de armações leves em diferentes cores e complemente sua lupa de magnificação com a iluminação potente da ZEISS EyeMag Light II.



Manuseio intuitivo

As lupas de magnificação da ZEISS permitem que você se adapte a cada situação. Basta colocar o seu par de lupas de magnificação individualizadas e pronto! Ao utilizar as lupas de magnificação flip-up, as lentes podem ser reposicionadas com precisão com um único ajuste ou levantadas completamente para permitir o contato visual com o paciente quando a ampliação não for necessária.

Lupas de magnificação ZEISS EyeMag

Sob medida para suas necessidades

As lupas de magnificação EyeMag® da ZEISS oferecem desempenho óptico excelente para usuários novos e experientes. As ferramentas de visualização oferecem excelente nitidez de imagem e profundidade de campo em toda a área de tratamento e podem ser equipadas

com iluminação LED. Fáceis e confortáveis no uso, as lupas de magnificação EyeMag da ZEISS combinam elegância a um design funcional em uma ampla gama de distâncias de trabalho e níveis de magnificação.



- ZEISS EyeMag Smart TTL**
- No design through-the-lens, o sistema óptico fica montado na própria lente de suporte
 - Com magnificação 2,5x ou 3,0x
 - Disponível em armações de óculos de titânio e em várias formatos e cores
 - O sistema tem valores de prescrição individuais
 - Perfeita para usuários que precisam de magnificação básica e um amplo campo de visão



- ZEISS EyeMag Classic**
- Lupa de magnificação individualizada, com sistema óptico montado na superfície da lente de suporte
 - Com magnificação 2,0x ou 2,5x
 - Disponível em armações de óculos de titânio e em várias formatos e cores
 - O sistema tem valores de prescrição individuais
 - Modelo de entrada com preço atrativo, ideal para usuários que precisam de magnificação básica ou para estudantes



- ZEISS EyeMag Light II**
- Combinada com ópticas ZEISS de alta qualidade, a potente ZEISS EyeMag Light II oferece reconhecimento extremamente detalhado e visão inalterada de estruturas minúsculas
 - Ajuste perfeito para todas as lupas de magnificação ZEISS EyeMag



- ZEISS EyeMag Smart**
- Flip-up
 - Com magnificação 2,5x
 - Disponível com armações de óculos de titânio em várias formas e cores ou com armações esportivas
 - Os valores de prescrição individuais podem ser ajustados diretamente pela ZEISS
 - Perfeita para usuários que precisam de magnificação básica e mudança flexível de ângulo durante o uso



- ZEISS EyeMag Pro F e ZEISS EyeMag Pro S**
- Flip-up
 - Com magnificação de 3,2x a 6,0x
 - Disponível com armações de óculos em titânio em várias formas e cores ou com uma confortável tira de cabeça
 - Os valores de prescrição individuais podem ser ajustados diretamente pela ZEISS
 - Perfeita para usuários que precisam de muita magnificação e mudança flexível de ângulo durante o uso

ZEISS EyeMag Classic

Disponível com ampliação de 2,0x ou 2,5x e óptica galileiana, a ZEISS EyeMag Classic é o modelo mais leve de todas as lupas de magnificação da ZEISS. Instalados na superfície das lentes de suporte, os sistemas ópticos personalizados proporcionam uma visualização nítida

de detalhes minuciosos e de estruturas, sendo adaptados com precisão à sua prescrição. ZEISS EyeMag Classic é um sistema ideal para estudantes de medicina e profissionais que não têm experiência prévia com as lupas e que preferem um modelo leve.



EyeMag Classic – Propriedades ópticas

Magnificação	2,0x					2,5x				
Distância de trabalho em mm	300	350	400	450	500	350	400	450	500	550
Campo de visão em mm	52	60	68	76	84	49	55	61	67	74

Escolha uma destas opções de armação e cor:





ZEISS EyeMag Smart

Com uma magnificação de 2,5x, as lupas de magnificação ZEISS EyeMag Smart oferecem uma impressionante reprodução de cores de estruturas anatômicas. Elas têm óptica galileana, ou seja, quando a magnificação não for necessária, a lupa pode simplesmente ser levantada, desobstruindo a visão do usuário. Disponíveis com armações leves de titânio em vários formatos e cores ou com armações esportivas, as ZEISS EyeMag Smart oferecem

uma variedade de opções de ajuste para inclinação e ângulo de visão flexíveis, além de um ajuste confortável e ergonômico. A regulagem é rápida e fácil, e as configurações da lupa de magnificação permanecem estáveis na posição selecionada. O resultado: a ZEISS EyeMag Smart é uma ótima escolha para usuários que precisam de uma lupa de magnificação compacta e fácil de manusear.

EyeMag Smart – Propriedades ópticas


Magnificação	2,5x				
Distância de trabalho em mm	300	350	400	450	550
Campo de visão em mm	67	77	86	96	115

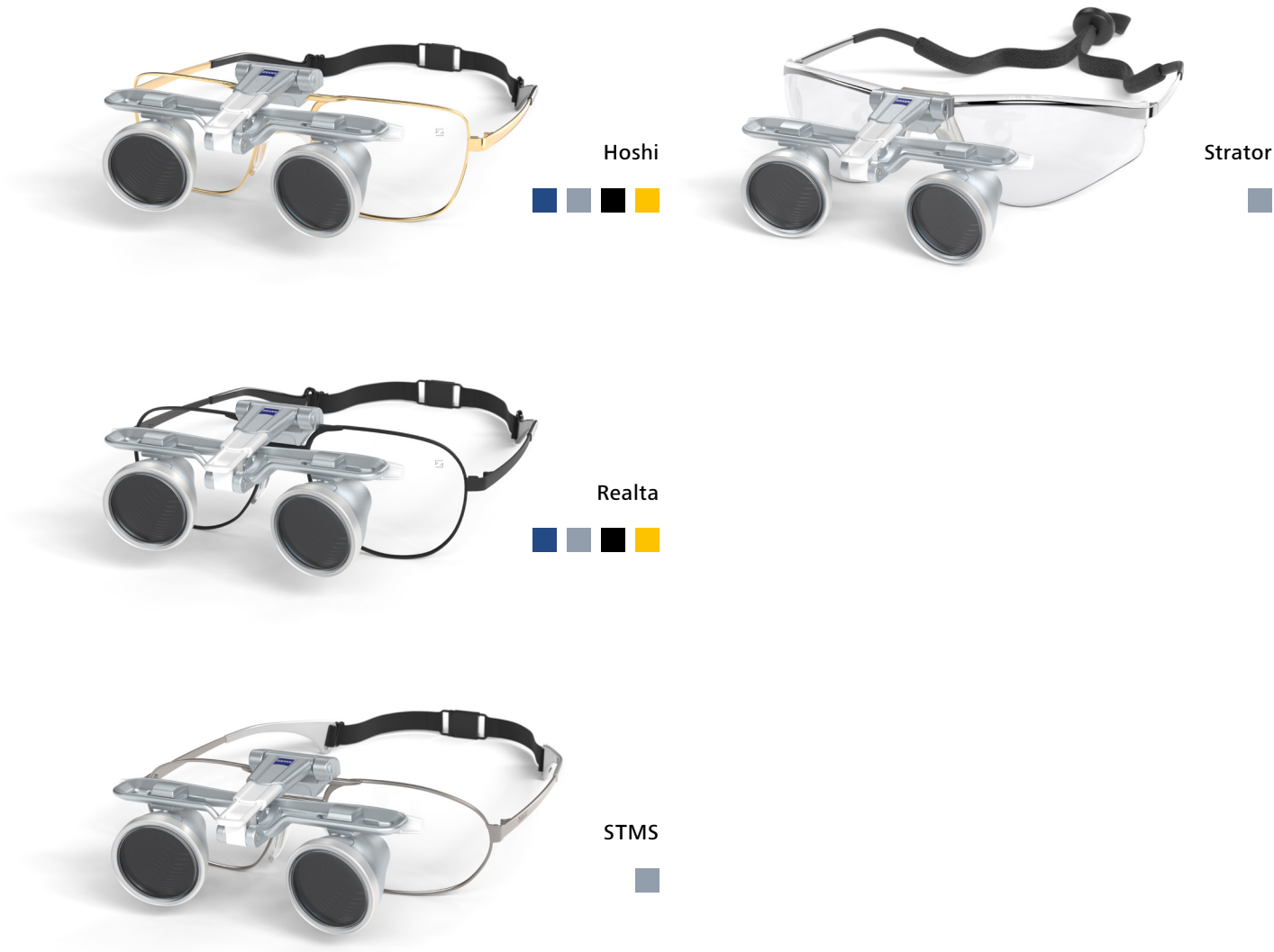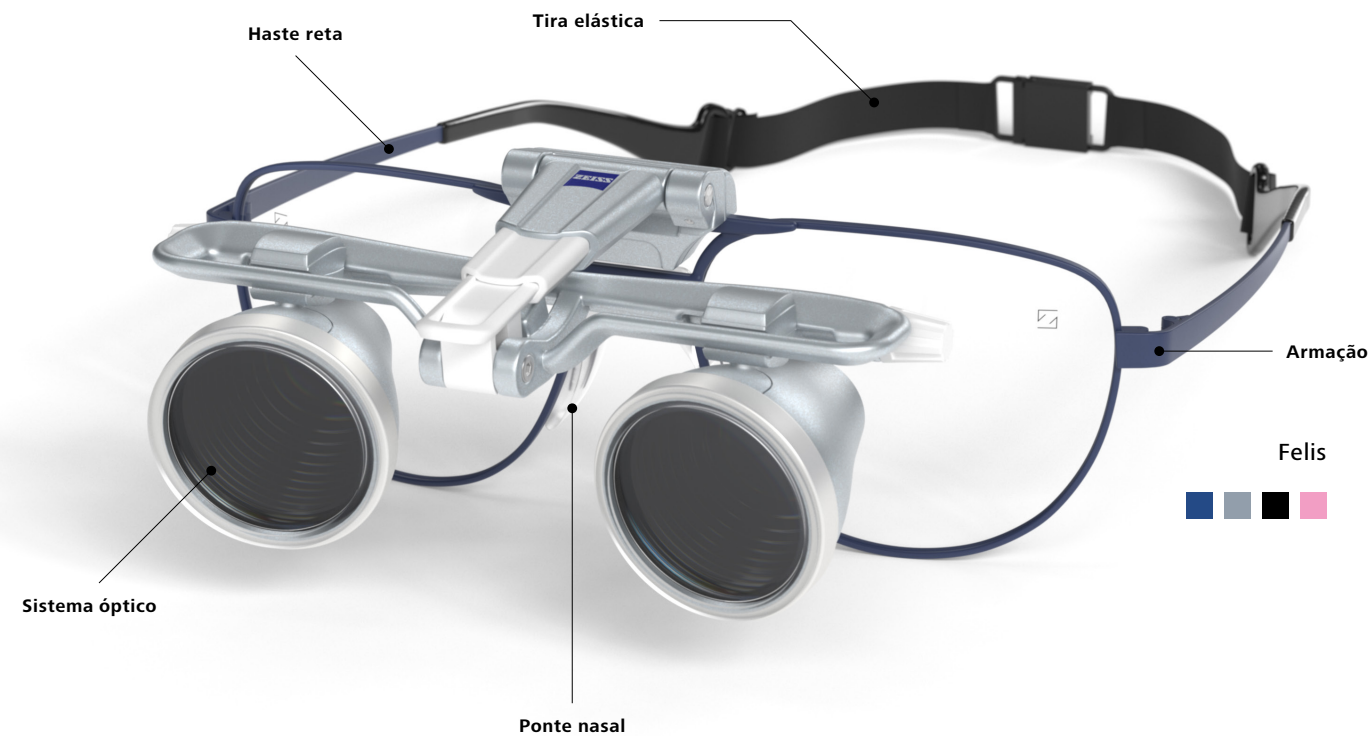

ZEISS EyeMag Smart TTL

Com magnificação 2,5× ou 3,0× e óptica galileana, a ZEISS EyeMag Smart TTL oferece um grande campo de visão com ótima resolução de detalhes e muita profundidade de campo em toda a área de aplicação. Cada sistema é

uma solução personalizada, baseada nos dados de cada usuário, e pode incluir a prescrição necessária. É ideal para usuários que precisam de pouca magnificação e que querem um sistema TTL personalizado.

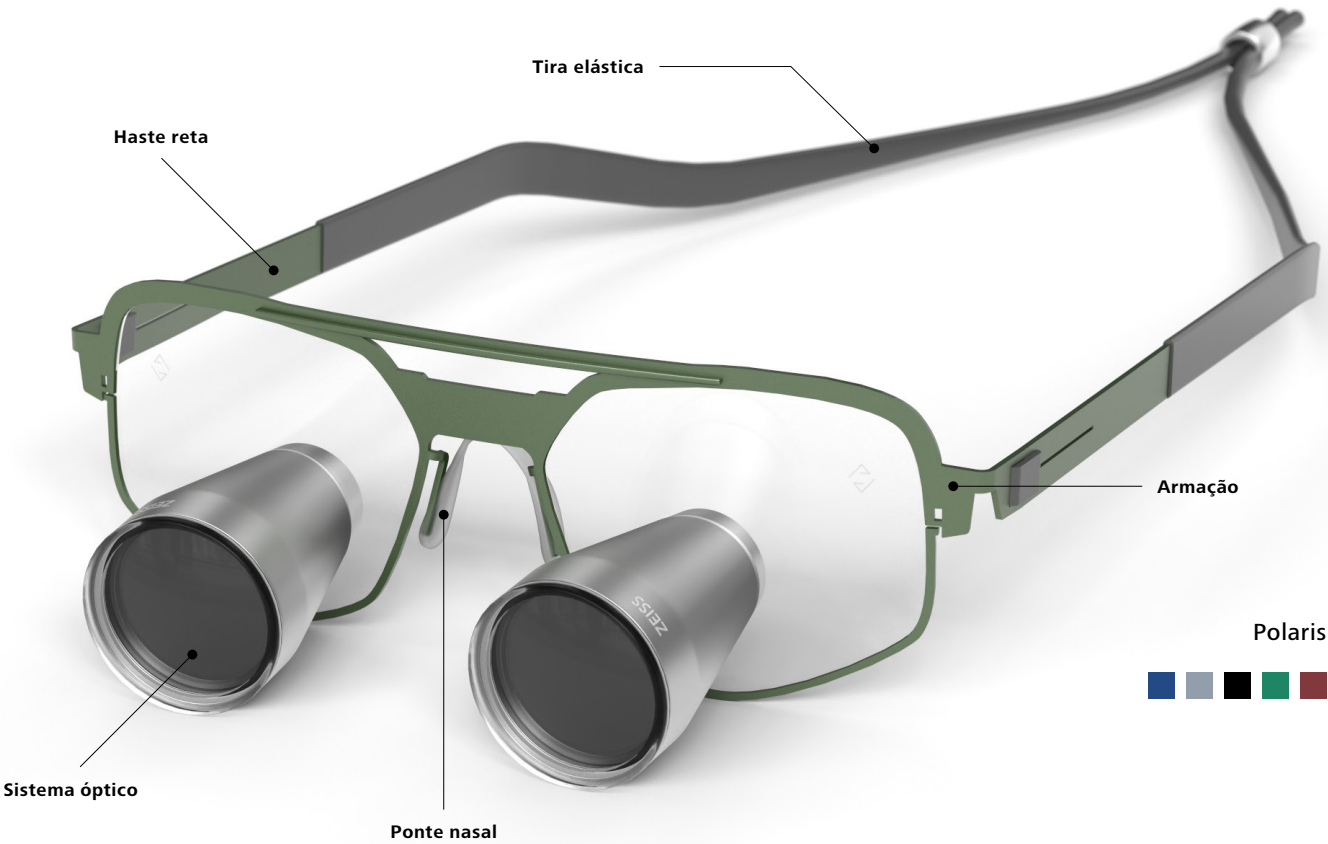

EyeMag Smart TTL – Propriedades ópticas

Magnificação	2,5×					3,0×				
Distância de trabalho em mm	350	400	450	500	550	350	400	450	500	550
Campo de visão em mm	70	78	87	96	105	54	60	80	92	104


Escolha uma destas opções de armação e cor:



ZEISS EyeMag Pro


Os usuários experientes que precisam de mais magnificação vão gostar das capacidades avançadas de visualização da ZEISS EyeMag Pro, com óptica Kepler. Disponível em vários níveis de magnificação, de 3,2x a 6,0x. Ela oferece imagens estereoscópicas de alto contraste com nitidez de ponta a ponta, permitindo o reconhecimento e a diferenciação de detalhes. O sistema óptico pode ser simplesmente levantado quando a

magnificação não é necessária. Montadas em uma armação de óculos leve de titânio (ZEISS EyeMag Pro F) ou com um sistema de suporte com tira de cabeça (ZEISS EyeMag Pro S), as lupas de magnificação oferecem ajustes para visualizações em várias inclinações e ângulos, enquanto propiciam uma posição de trabalho confortável e ergonômica. A regulagem é rápida, fácil e permanece estável na posição escolhida.

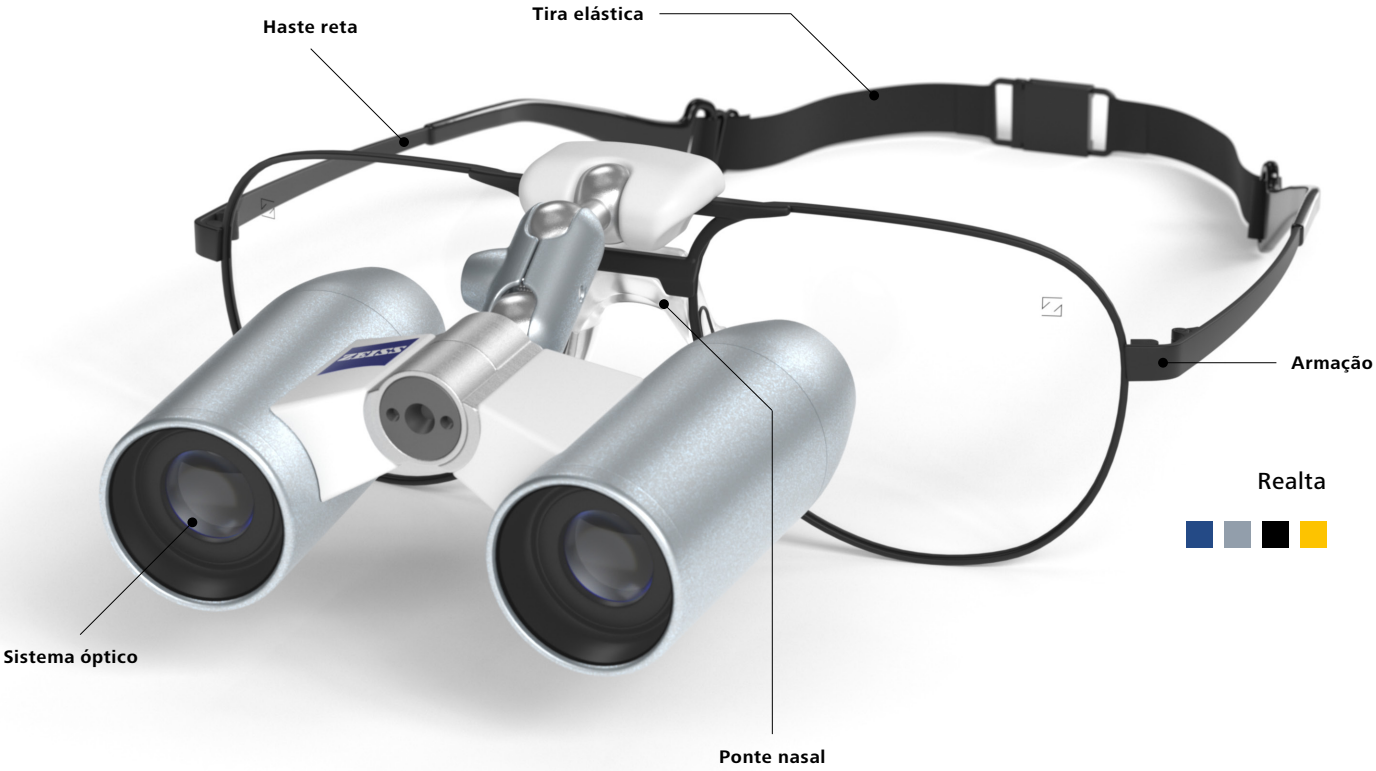

EyeMag Pro F/S – Propriedades ópticas

Magnificação	3,2x	3,3x	3,5x	3,6x	4,0x				4,3x	4,5x	5,0x			6,0x	
Distância de trabalho em mm	500	450	400	350	300	450	500	550	400	350	300	500	550	500	550
Campo de visão em mm	115	100	86	71	56	81	93	99	68	56	44	72	72	63	65

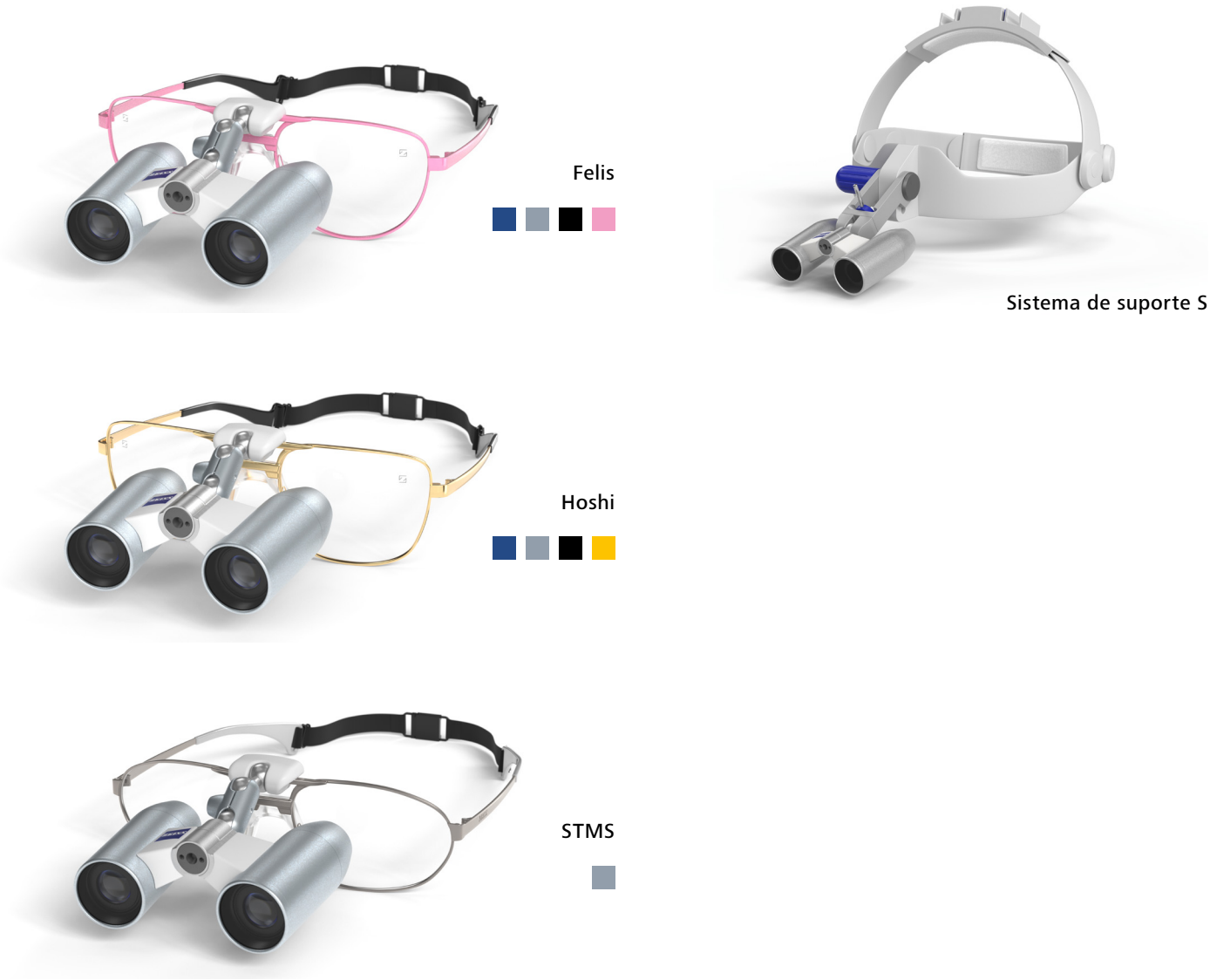

ZEISS EyeMag Light II


A poderosa iluminação ZEISS EyeMag Light II fornece luz intensa para um alto reconhecimento de detalhes. Quando combinada com as lupas de magnificação ZEISS EyeMag, a iluminação LED permite uma visão nítida e clara de detalhes e estruturas minúsculas, graças à sua grande semelhança com a luz diurna e à distribuição

uniforme da luz. Dois conjuntos de baterias recarregáveis com um carregador prático para um trabalho praticamente sem interrupções, todos os dias. O design compacto, portátil e ergonômico otimiza o conforto para o uso diário em uma ampla variedade de procedimentos.

Iluminação onde é necessária – flexível e móvel



Em combinação com as lupas de magnificação ZEISS EyeMag, a EyeMag Light II oferece luz quase coaxial, resultando na formação mínima de sombras.

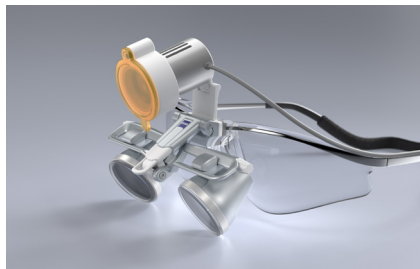

O filtro laranja móvel para ZEISS EyeMag Light II evita a cura prematura de materiais compostos.



Dois conjuntos de baterias recarregáveis com um carregador prático para um trabalho praticamente sem interrupções.



Um só botão


Controle de intensidade de 3 passos. A configuração da intensidade luminosa pode ser alterada para 33%, 66% e 100%

Indicador de nível de carga


Prática presilha de cinto para liberdade de movimentos



■ Duração da bateria
■ Tempo de carga da bateria

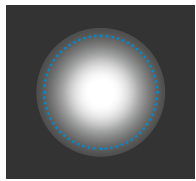

Sistema convencional

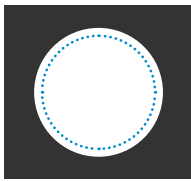

ZEISS EyeMag Light II

Ao contrário das iluminações com configurações convencionais de lentes, a ZEISS EyeMag Light II oferece, com seu campo iluminado claramente definido, uma iluminação uniforme e poderosa em todo o campo de visão das lupas ZEISS.

..... Campo de visão

Editar configuração

Personalize a sua lupa de magnificação EyeMag

Sua lupa de magnificação é tão pessoal quanto seus óculos – ela precisa oferecer um excelente desempenho óptico e, ao mesmo tempo, combinar com o seu estilo pessoal. Para que você tenha uma visão geral do portfólio de produtos das lupas de magnificação ZEISS EyeMag, criamos o configurador de produtos.

Encontre a lupa de magnificação ideal para você:
zeiss.ly/configurator



Selecione o tipo de lupa de magnificação sobre a qual deseja saber mais e configure a armação e a cor de acordo com suas preferências.



Configurações e acessórios

Linha EyeMag da ZEISS

Produto	ZEISS EyeMag Classic	ZEISS EyeMag Smart	ZEISS EyeMag Smart TTL	ZEISS EyeMag Pro F	ZEISS EyeMag Pro S
Óptica	Galileana	Galileana	Galileana	Kepler	Kepler
Armações	Hoshi	Hoshi	Hoshi	Hoshi	Sistema de suporte S
	Felis	Felis	Felis	Felis	
	Realta	Realta	Realta	Realta	
	STMS	STMS	STMS	STMS	
	Nova	Strator	Nova		
	Polaris		Polaris		
	Sirius		Sirius		
Tampas de proteção	–	●	●	●	●
Proteção de contato	–	●	–	●	●
Proteções laterais*	○	○	○	○	–
Estojo forrado com espuma macia	●	●	●	●	●
Bolsa para a lupa	●	●	●	●	●
Pano de microfibra para limpeza	●	●	●	●	●
Spray para limpeza das lentes	●	–	●	–	–
Prescrição pessoal**	○	○	○	○	–

*Disponível apenas para armações específicas. Entre em contato com seu representante de vendas para mais informações.

**Não disponível para a armação Strator. Entre em contato com seu representante de vendas para mais informações.

● incluso ○ possível – indisponível

ZEISS EyeMag Light II – Pacote padrão da ZEISS EyeMag Light II	
Caixa de lâmpadas	Fonte de luz LED potente com controle integrado de temperatura
Unidade de controle	Com controle de intensidade em 3 etapas (em três níveis: 100%, 66%, 33%), indicador de nível de carga e presilha de cinto
Adaptador para lupas ZEISS	Para acoplar a iluminação LED ZEISS EyeMag Light II à EyeMag Smart e à EyeMag Pro F/S
Clipe de cabo	Para conectar o cabo da lâmpada ao suporte
Estojo forrado com espuma macia	Proteção de alta qualidade e à prova de quedas para sua fonte de luz e acessórios
Filtro laranja móvel para ZEISS EyeMag Light II	Para evitar a cura prematura de materiais compostos para aplicação odontológica
Intensidade luminosa	Até 50.000 lux (a uma distância de 300 mm)
Temperatura de cor típica	Parece com a luz do dia (aproximadamente 5.700 Kelvin)
Peso da unidade de iluminação	19 g (0,6 oz)
2 baterias	2 baterias de íons de lítio para carregamento rápido
Carregador de bateria	Processador controlado com adaptador de energia específico do país
Tempo de operação	Devido ao pouco tempo de recarga, os dois pacotes de baterias permitem um uso contínuo da luz durante todo o dia de trabalho



EyeMag medical loupes
EyeMag Light II



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemanha
www.zeiss.com/loupes
www.zeiss.com/med/contacts

pt-BR_30_010_0066V CZ-V/2026 Edição internacional: disponível apenas em países selecionados.
Os conteúdos deste folheto podem diferir do atual status de aprovação do produto ou da oferta de serviço no seu país. Entre em contato com nossos representantes regionais para obter mais informações.
Sujeito a alterações no design e no escopo de entrega devido a desenvolvimentos técnicos contínuos. EyeMag é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Carl Zeiss Meditec AG ou outras empresas do ZEISS Group na Alemanha e/ou em outros países.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2026. Todos os direitos reservados.