



Seeing beyond

## FORUM da ZEISS

### Versão 4.4

#### Software de gerenciamento de dados intuitivo da ZEISS

O FORUM® da ZEISS é um software de oftalmologia escalável que pode ser adaptado às suas necessidades.

Descubra a versão mais recente que oferece ainda mais simplicidade, ferramentas de análise avançadas e segurança aprimorada.

#### Mais simplicidade:

Experimente a conveniência total por meio de uma interface intuitiva e pouquíssimos cliques.

- Realize ações como a aplicação de zoom e movimentação panorâmica simultaneamente em diversos documentos para comparação rápida.
- Exporte documentos nos formatos DICOM e não DICOM com flexibilidade.
- Alterne facilmente entre a análise de documentos em uma exibição sobreposta ou lado a lado e navegue pelos documentos de maneira intuitiva.

#### Ferramentas de análise avançadas:

Descubra informações mais profundadas e tome decisões seguras com ferramentas de análise poderosas.

- Use canais de cor para visualizar as estruturas da retina do olho.
- Meça e anote manualmente as áreas específicas de imagens.
- Analise os pares de imagens estereoscópicas CLARUS para a avaliação.
- Percorra simultaneamente os exames OCT mais recentes no OCT Display integrado.

#### Segurança aprimorada:


Tenha tranquilidade por meio da proteção segura e a conformidade com padrões de segurança.

- Proteja dados em trânsito por meio de criptografia TLS e dados armazenados com a criptografia transparente do banco de dados.
- Confie na comunicação DICOM TLS com instrumentos da ZEISS e de outros fornecedores<sup>1</sup> e sistemas DICOM.
- Use uma central de administração de dados intuitiva para definir configurações complexas ou agendar seus backups com facilidade.

#### Veja como se beneficiar adicionalmente do ZEISS FORUM

- Aumente sua eficiência e economize tempo, espaço e dinheiro com um fluxo de trabalho totalmente digital.
- Expanda seu software FORUM da ZEISS com aplicações clínicas para retina, glaucoma, refrativas e para pacientes com catarata.
- Conecte todos os seus dispositivos de diagnóstico (DICOM e não DICOM) da ZEISS, assim como de outros fornecedores, e integre-os facilmente a sistemas de EMR e de informações hospitalares existentes.
- Compartilhe convenientemente os dados entre diversos locais clínicos com a arquitetura multisite do ZEISS FORUM.

<sup>1</sup> O instrumento modalidade/deve ser compatível com TLS

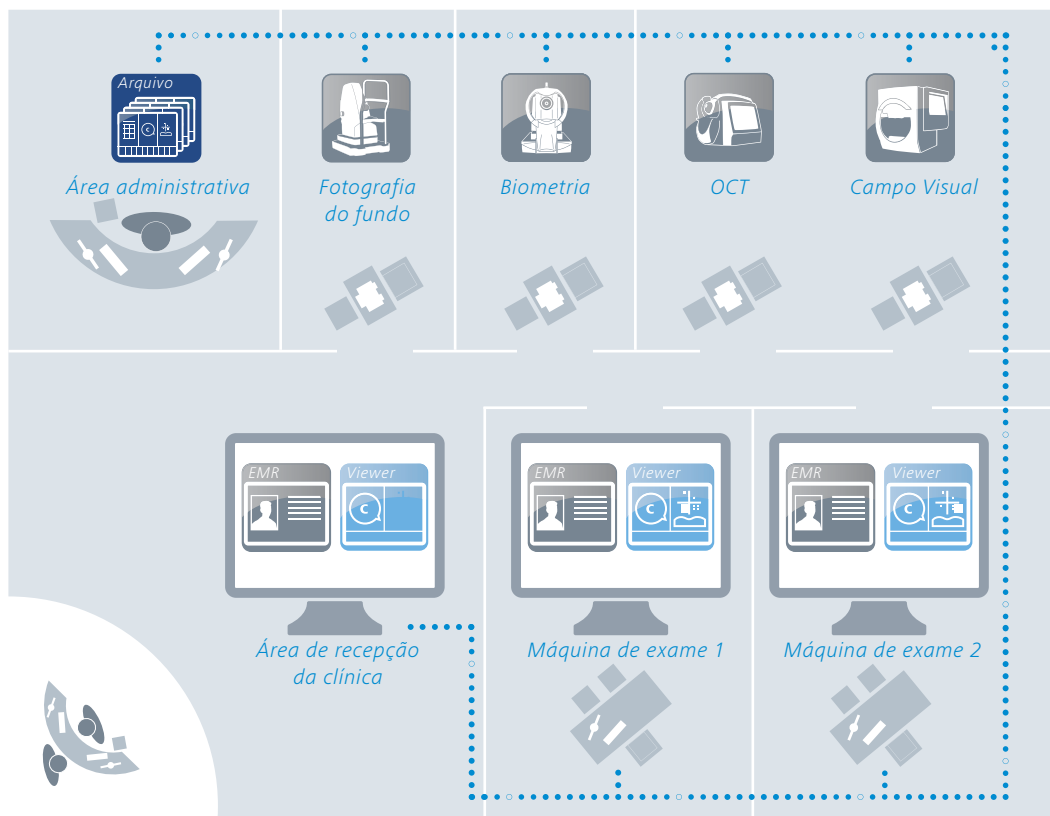

O ZEISS FORUM possibilita o acesso em tempo real a dados de diagnóstico de locais físicos e remotos.

## Requisitos mínimos para o FORUM 4.4.3 da ZEISS

Hardware	ZEISS FORUM Archive	ZEISS FORUM Viewer	
		PC	Mac®
<b>Processador</b>	Intel Core i5 (11ª geração)	Intel Core i5 (11ª geração)	Intel Core i5 (11ª geração) ou Apple ARMv6
<b>RAM disponível</b>	Mínimo <sup>2</sup> : 8 GB Recomendado: 16 GB	Mínimo <sup>2</sup> : 8 GB Recomendado: 16 GB	Mínimo <sup>2</sup> : 8 GB
<b>Capacidade livre do disco</b>	Mínimo: 200 GB	Mínimo: 8 GB	Mínimo: 8 GB
<b>Resolução da tela</b>	Mínimo: 1280 × 800 pixels Recomendado: 1680 × 1050 pixels ou superior	Mínimo: 1280 × 800 pixels Recomendado: 1920 × 1080 pixels ou superior	Mínimo: 1280 × 800 pixels Recomendado: 1680 × 1050 pixels ou superior
<b>Sistema operacional</b>	Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	macOS® Sonoma 14.x (FORUM Viewer 4.4.1) macOS® Sequoia 15.x (FORUM Viewer 4.4.2) macOS® Tahoe 26.x (FORUM Viewer 4.4.3)

Fale com seu representante de vendas e obtenha configurações para soluções expandidas.

CE 0297

**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Alemanha  
[www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

<sup>2</sup> Considera a instalação completa, incluindo plug-ins.